


FEHLING KANÜLEN UND SAUGER MIT ABNEHMBAREM KORB

Gültig für alle Kanülen und Sauger mit abnehmbarem Korb

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MNM-3

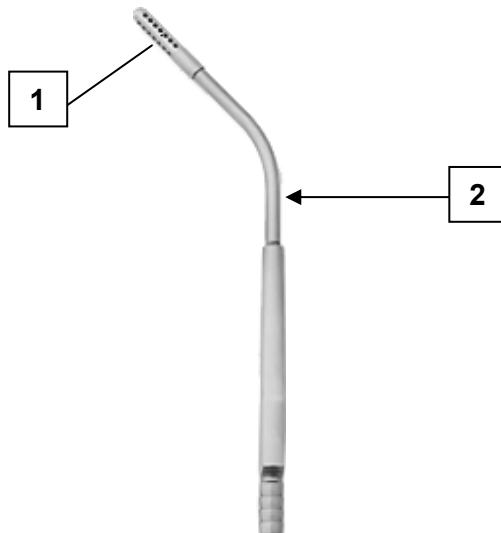

- 1 Korb
- 2 Sauger/Kanüle

2) Demontage

1. Den Korb (1) am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich vom Gewinde nehmen lässt.




2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.



3) Montage



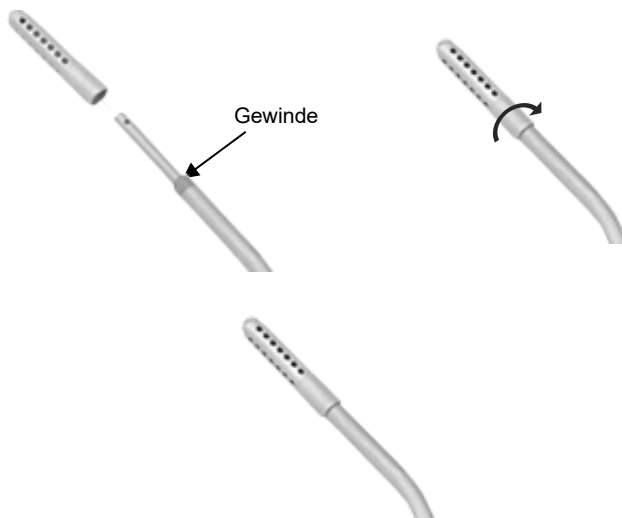








1. Den Korb (1) auf das Gewinde am vorderen Teil des Saugers oder der Kanüle (2) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.





2. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Katalognummer	 Chargenbezeichnung	 Seriennummer
 Medizinprodukt	 eindeutige Produktidentifizierung	 CE-Kennzeichnung
 Ölkännchen für zu schmierende Stellen	 CE-Kennzeichnung	

Kontakt zum Hersteller

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------