


FEHLING HANDGRIFF MIT SCHRAUBHÜLSE


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

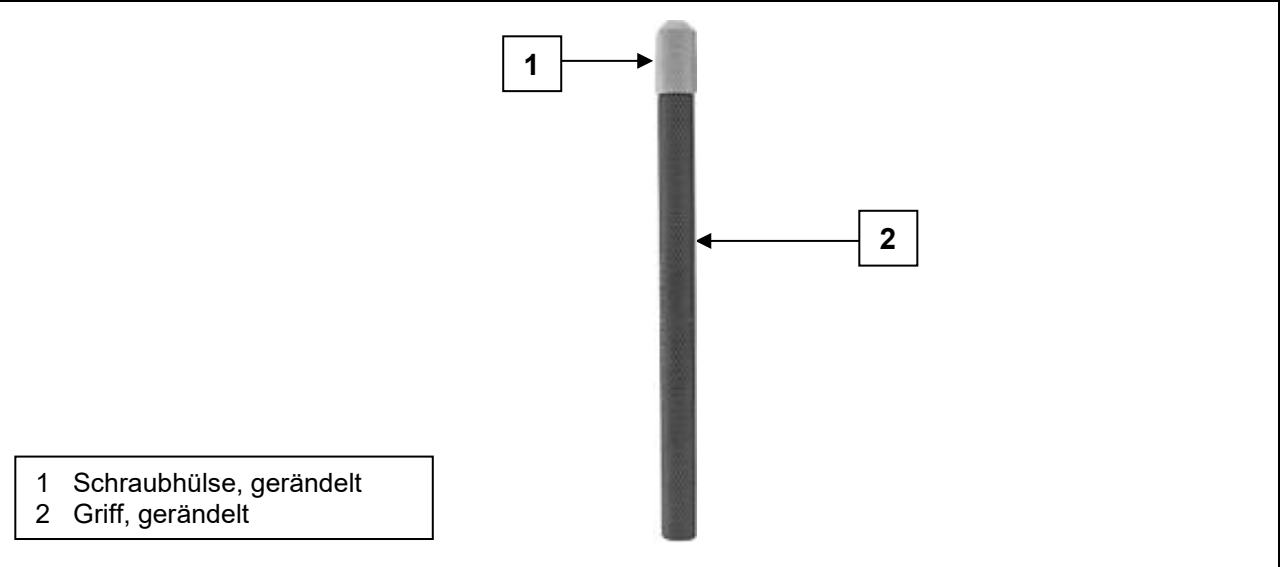

2) Demontage

1. Die Schraubhülse (1) am vorderen Teil des Griffs (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis dieser sich vom Gewinde nehmen lässt.

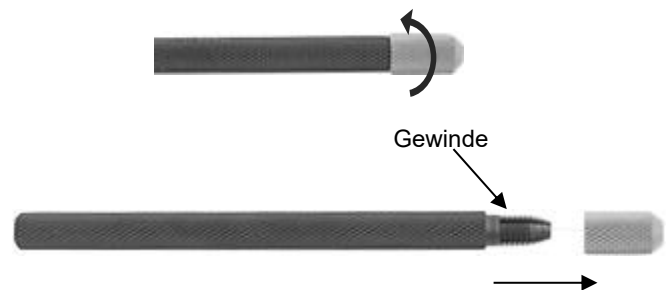


2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.



Zu Wechsel oder Entnahme des Schaftes aus dem Griff (2) muss die Schraubhülse (1) nur gelockert werden.

3) Montage

1. Die Schraubhülse (1) auf das Gewinde am vorderen Teil des Griffs (2) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

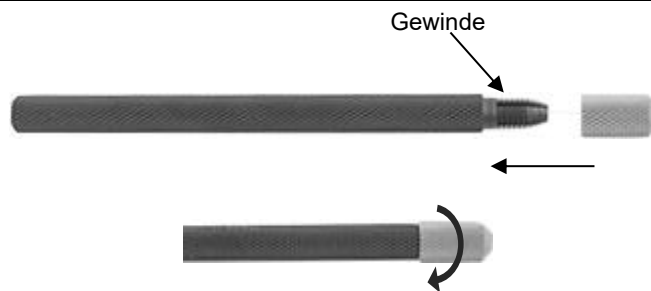












2. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.





Zu Wechsel oder Entnahme des Schaftes aus dem Griff (2) muss die Schraubhülse (1) nur gelockert werden.

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

| | | |
|---|---|---|
|  Hersteller |  Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten |  Achtung |
|  Katalognummer |  Chargenbezeichnung |  Seriennummer |
|  Medizinprodukt |  eindeutige Produktidentifizierung |  |
|  Ölkännchen für zu schmierende Stellen |  CE-Kennzeichnung | |

Kontakt zum Hersteller

| | | |
|---|---|---|
|  | FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de |  |
|---|---|---|