


**FEHLING HAKENFÜHRUNGEN (FÜR KUGELADAPTER) UND FÜHRUNGSZANGEN**

**1a) Bestandteile / Erklärungsgrundlage zweiteilige Instrumente**


Beispielhaft: MRN-3A

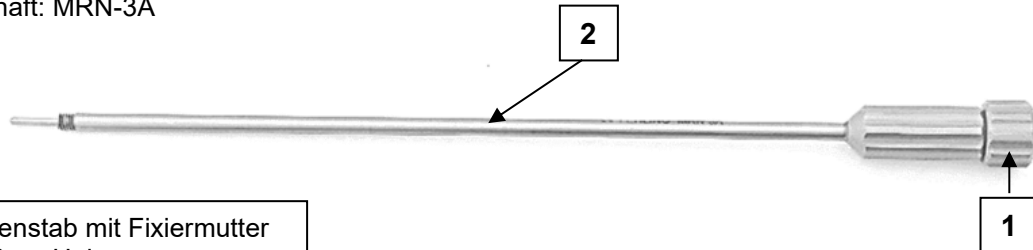

- 1 Innenstab mit Fixiermutter
- 2 äußere Hülse

**1b) Bestandteile / Erklärungsgrundlage dreiteilige Instrumente**

Beispielhaft: MRI-0

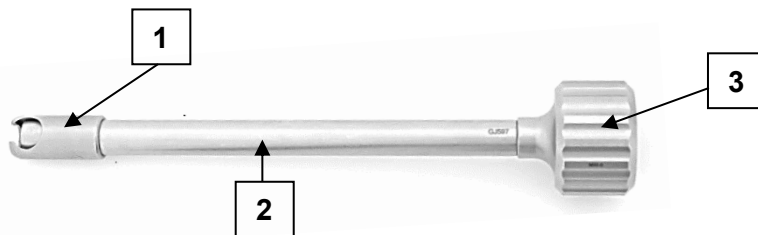


- 1 Innenstab
- 2 äußere Hülse
- 3 Fixiermutter

## 2a) Demontage zweiteilige Instrumente

1. Die Fixiermutter (3) am Innenstab (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Gewinde vollständig gelöst ist und sich der Innenstab (1) in Richtung der Fixiermutter (3) aus der äußeren Hülse (2) ziehen lässt.



2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

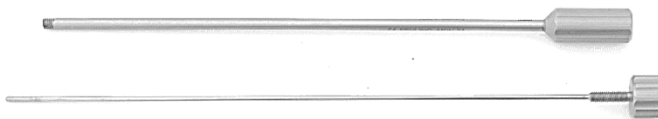


## 2b) Demontage dreiteilige Instrumente


1. Die Fixiermutter (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis diese sich vom Gewinde des Innenstabs (1) nehmen lässt.



2. Die äußere Hülse (2) in Richtung des Gewindes vom Innenstab (1) abziehen.

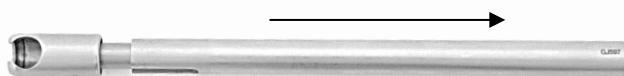


3. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.

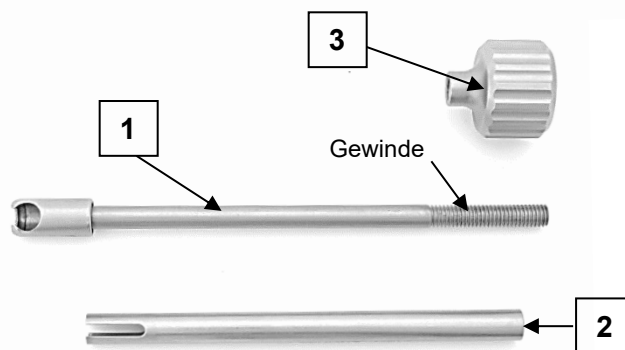

## 3a) Montage zweiteilige Instrumente

1. Die äußere Hülse (2) über den Innenstab (1) schieben.

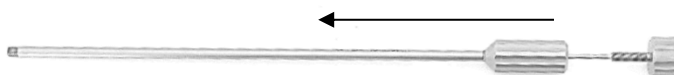

2. Die Fixiermutter (3) auf das Gewinde des Innenstabs (1) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.



3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



### 3b) Montage dreiteilige Instrumente

1. Die äußere Hülse (2) über das Gewinde auf den Innenstab (1) schieben.



Es ist darauf zu achten, dass der Querriegel, der sich in der Aufnahme für die Kugeladapter des Innenstabs (1) befindet, in die beiden Schlitze der äußeren Hülse (2) hinein gleitet.

2. Die Fixiermutter (3) auf das Gewinde des Innenstabs (1) setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.



3. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.



### Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Katalognummer	 Chargenbezeichnung	 Seriennummer
 Medizinprodukt	 eindeutige Produktidentifizierung	 CE-Kennzeichnung
 Ölkännchen für zu schmierende Stellen	 CE-Kennzeichnung	

Kontakt zum Hersteller



FEHLING INSTRUMENTS GmbH  
Seligenstädter Str. 100  
63791 Karlstein/Germany  
Tel.: +49 (0) 6188-9574-40  
Fax: +49 (0) 6188-9574-45  
E-Mail: [info@fehling-instruments.de](mailto:info@fehling-instruments.de)  
[www.fehling-instruments.de](http://www.fehling-instruments.de)

