


KLESZCZE FEHLING CERAMO – UCHWYT PIERŚCIENIOWY ZE ŚRUBĄ

1) Elementy składowe / podstawa opisu

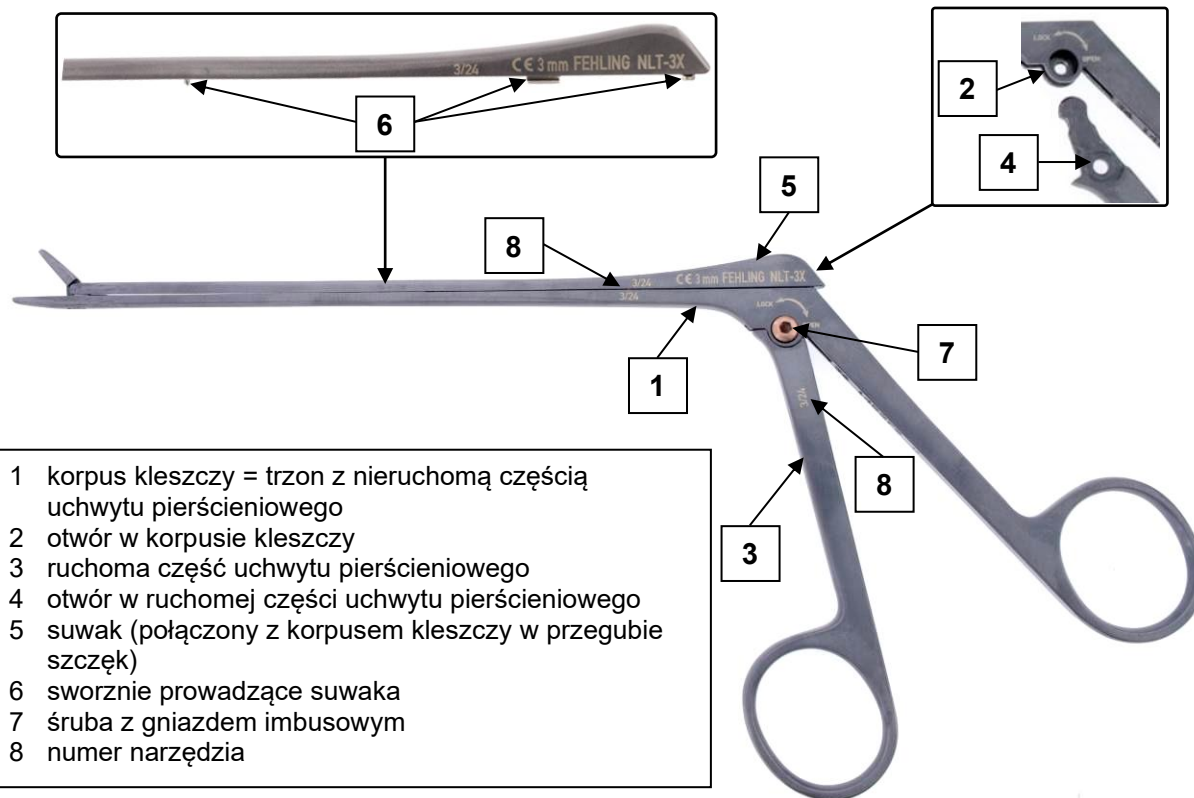

2) Demontaż


1. W celu demontaży należy położyć kleszcze na stabilnej powierzchni roboczej. Odkręcić śrubę z gniazdem imbusowym (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą śrubokręta TXW-1X (alternatywnie śrubokręta TXW-2X do sterylizacji) i wyjąć ją z otworu na śrubę.
2. Przy zamkniętych szczękach kleszczy wyciągnąć ruchomą część uchwytu pierścieniowego (3) w dół, wysuwając ją z korpusu kleszczy (1).



3. Pociągnąć suwak (5) do oporu w kierunku nieruchomej części uchwytu pierścieniowego korpusu kleszczy (1), aż do całkowitego rozwarcia szczęk. Następnie odłączyć sworznie prowadzące suwaka (6) od szyny prowadzącej w korpusie kleszczy (1), wykonując ruch w górę.



4. Odchylić suwak (5) w górę, aby uzyskać wystarczający odstęp między suwakiem (5) a trzonem korpusu kleszczy (1). Należy upewnić się, że szczęki są całkowicie rozwarłe. Wyczyścić kleszcze w tej pozycji.

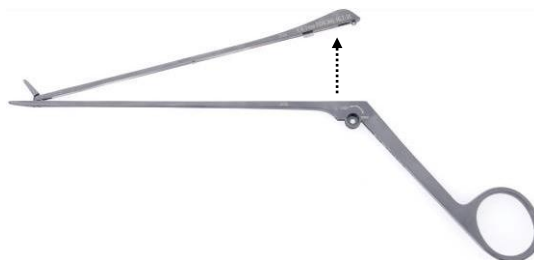


Suwak (5) jest na stałe połączony z trzonem korpusu kleszczy (1) za pomocą przegubu szczęk. Przesunięcie suwaka (5) w bok w pozycji otwartej prowadzi do deformacji lub nawet pęknięcia przegubu lub sworznia prowadzącego suwaka (6).

3) Montaż

1. Korpus kleszczy (1) i ruchoma część uchwytu pierścieniowego (3) mają identyczny numer narzędzia (8), np. X20K553WM28. Należy montować wyłącznie części narzędzia oznaczone tym samym numerem (8). Śruby z gniazdem imbusowym (7) pasują do wszystkich rozkładanych kleszczy z uchwytem pierścieniowym i śrubą.



2. Wsunąć suwak (5) na trzon. Suwak (5) należy pociągnąć do tyłu w kierunku uchwytu pierścieniowego, aby umożliwić maksymalne rozwarcie szczęk. Tylko wtedy sworznie prowadzące suwaka (6) będą mogły prawidłowo zająć miejsce w szynie prowadzącej w trzonie.

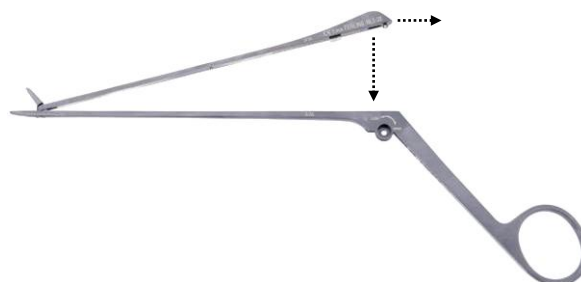



Bliższy sworzeń prowadzący należy umieścić w najbardziej zewnętrznym końcu szyny prowadzącej (patrz rysunek szczegółowy: na górze – sworznie prowadzące, na dole – mocowania w trzonie).

3. Wcisnąć suwak (5) na trzon korpusu kleszczy (1), a następnie przesunąć go do oporu w kierunku szczęk, aż do ich zamknięcia.



4. Przy zamkniętych szczękach wsunąć ruchomą część uchwyty pierścieniowego (3) do korpusu kleszczy (1). Otwory w ruchomej części uchwyty pierścieniowego (4) i trzonie kleszczy (2) muszą znajdować się dokładnie jeden nad drugim.



5. Włożyć śrubę z gniazdem imbusowym (7) do otworu, a następnie wkręcić ją do końca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą śrubokręta, nie używając siły.



6. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

	• Te śruby z gniazdem imbusowym mają gwint lewy. Przy odkręcaniu i dokręcaniu śrub z gniazdem imbusowym należy przestrzegać kierunku obrotów. • Podczas odkręcania i dokręcania śrub imbusowych nie jest konieczne używanie siły. Zbyt mocne obracanie śruby spowoduje uszkodzenie profilu gniazda imbusowego. • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia profilu gniazda imbusowego lub profilu śrubokręta należy niezwłocznie wymienić śrubę z gniazdem imbusowym i śrubokręt lub zlecić ich wymianę producentowi. • Śrubokręt TXW-1X można myć zimną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Narzędzie nie nadaje się do mycia gorącą wodą ani do sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C.
---	--

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	