


Kleszcze FEHLING CERAMO – UCHWYT KLESZCZOWY ZE ŚRUBĄ

1) Elementy składowe / podstawa opisu

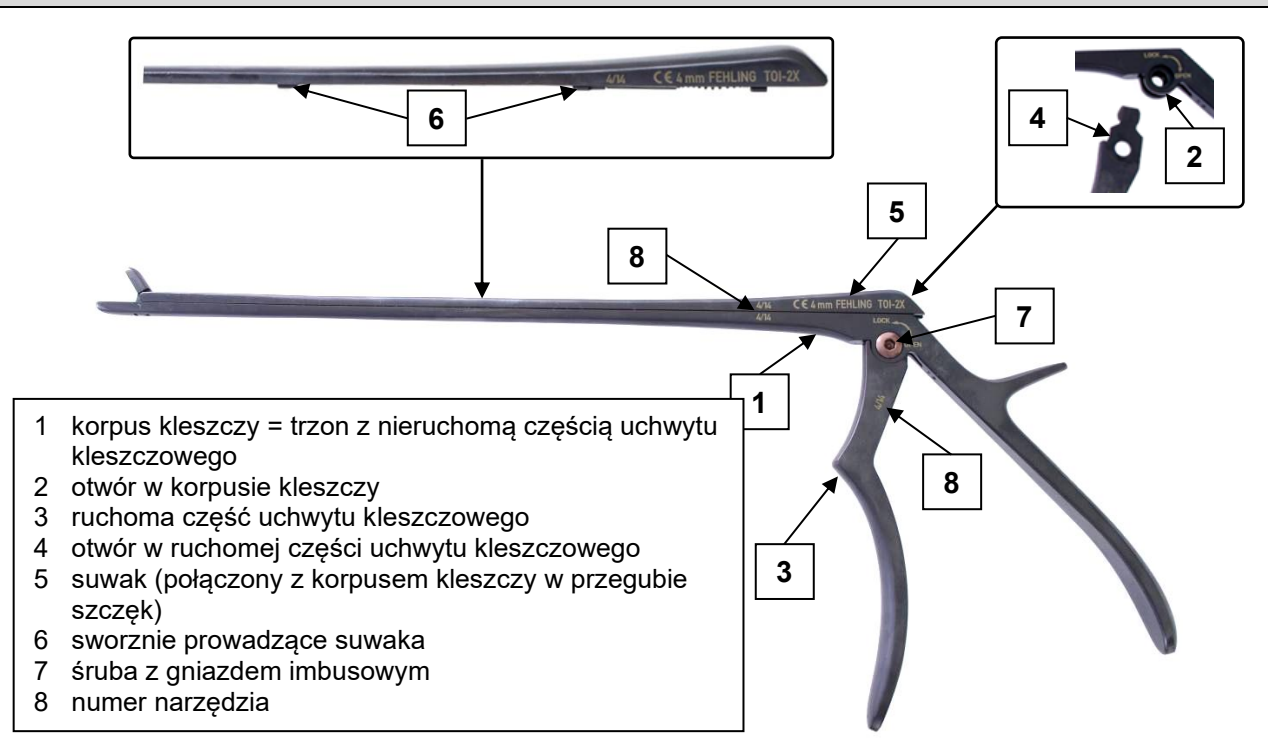

2) Demontaż

1. W celu demontażu należy położyć kleszcze na stabilnej powierzchni roboczej. Odkręcić śrubę z gniazdem imbusowym (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą śrubokręta TXX-0X (alternatywnie śrubokręta TXW-9X do sterylizacji) i wyjąć ją z otworu na śrubę.
2. Wyciągnąć ruchomą część uchwytu kleszczowego (3) z korpusu kleszczy (1), pociągając w dół.



3. Pociągnąć suwak (5) do oporu w kierunku nieruchomej części uchwyty kleszczowego korpusu kleszczy (1), aż do całkowitego rozwarcia szczęk. Następnie odłączyć sworznie prowadzące suwaka (6) od szyny prowadzącej w korpusie kleszczy (1), wykonując ruch w górę.



4. Odchylić suwak (5) w górę, aby uzyskać wystarczający odstęp między suwakiem (5) a trzonem korpusu kleszczy (1). Należy upewnić się, że szczęki są całkowicie rozwarte. Wyczyścić kleszcze w tej pozycji.



Suwak (5) jest na stałe połączony z trzonem korpusu kleszczy (1) za pomocą przegubu szczęk. Przesunięcie suwaka (5) w bok w pozycji otwartej prowadzi do deformacji lub nawet pęknięcia przegubu lub sworznia prowadzącego suwaka (6).

3) Montaż


1. Korpus kleszczy (1) i ruchoma część uchwyty kleszczowego (3) mają identyczny numer narzędzia (8), np. X20K553WM28. Należy montować wyłącznie części narzędzia oznaczone tym samym numerem (8). Śruby z gniazdem imbusowym (7) pasują do wszystkich rozkładanych kleszczy z uchwytem kleszczowym i śrubą.



2. Wsunąć suwak (5) na trzon. Suwak (5) należy pociągnąć do tyłu w kierunku uchwyty kleszczowego, tak aby szczęki były maksymalnie rozwarte. Tylko wtedy sworznie prowadzące suwaka (6) będą mogły prawidłowo zająć miejsce w szynie prowadzącej w trzonie.



3. Wcisnąć suwak (5) na trzon korpusu kleszczy (1), a następnie przesunąć suwak (5) do oporu w kierunku szczęk.

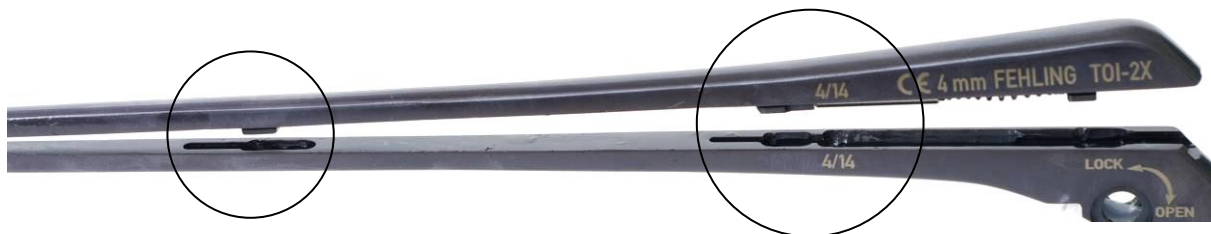

Sworznie prowadzące suwaka (6) należy umieścić w odpowiednich mocowaniach w trzonie korpusu kleszczy (1) (patrz rysunek szczegółowy: na górze – sworznie prowadzące, na dole – mocowanie w trzonie).

4. Nie zmieniając położenia suwaka (5) i trzonu, wsunąć ruchomą część uchwyty kleszczowego (3) do korpusu kleszczy (1). Otwory w ruchomej części uchwyty kleszczowego (4) i trzonie kleszczy (2) muszą znajdować się dokładnie jeden nad drugim.



5. Następnie włożyć śrubę z gniazdem imbusowym (7) do otworu i dokręcić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą śrubokręta, nie używając siły.



6. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

	• Te śruby z gniazdem imbusowym mają gwint lewy. Przy odkręcaniu i dokręcaniu śrub z gniazdem imbusowym należy przestrzegać kierunku obrotów. • Podczas odkręcania i dokręcania śrub imbusowych nie jest konieczne używanie siły. Zbyt mocne obracanie śruby spowoduje uszkodzenie profilu gniazda imbusowego. • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia profilu gniazda imbusowego lub profilu śrubokręta należy niezwłocznie wymienić śrubę z gniazdem imbusowym i śrubokręt lub zlecić ich wymianę producentowi. • Śrubokręt TXX-0X można myć zimną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Narzędzie nie nadaje się do mycia gorącą wodą ani do sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C.
---	--

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	