


FEHLING CERAMO RONGEURS – MANGO DE LOS ALICATES CON TORNILLO

1) Componentes / Base explicativa

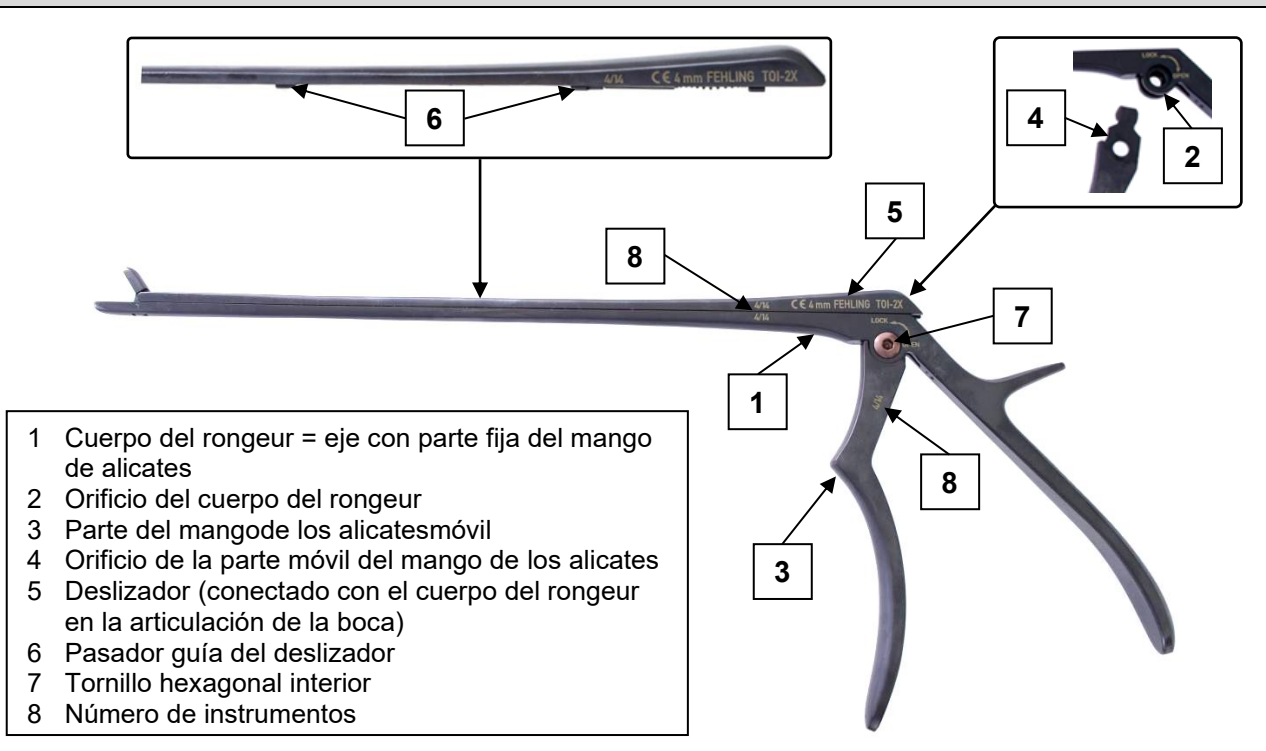

2) Desmontaje

1. Coloque el rongeur sobre una superficie de trabajo firme para desmontarlo. Desenrosque el tornillo hexagonal interior (7) en el sentido de las agujas del reloj con el destornillador TXX-0X (alternativamente destornillador esterilizable TXW-9X) y retírelo del orificio del tornillo.
2. Tire de la parte móvil del mango de los alicates (3) hacia abajo para extraerla del cuerpo del rongeur (1).



3. Tire del deslizador (5) hasta el tope en la dirección de la parte del mango de los alicates fijo del cuerpo del rongeur (1) hasta que la boca esté completamente abierta. A continuación, suelte hacia arriba los pasadores guía del deslizador (6) del carril guía del cuerpo del rongeur (1).
4. Doble el deslizador (5) hacia arriba para crear suficiente distancia entre el deslizador (5) y el eje del cuerpo del rongeur (1). Asegúrese de que la boca está completamente abierta. Limpie el rongeur en esta posición.



El deslizador (5) está firmemente unido al eje del cuerpo del rongeur (1) por la articulación de la boca. El movimiento lateral del deslizador (5) en posición abierta provoca la deformación o incluso la rotura de la articulación o del pasador guía del deslizador (6).

3) Montaje


1. El cuerpo del rongeur (1) y la parte móvil del mango de los alicates (3) tienen un número de instrumento (8) idéntico, por ejemplo X20K553WM28. Sólo pueden ensamblarse piezas de instrumentos con el mismo número de instrumento (8). Los tornillos hexagonales interiores (7) son universalmente adecuados para todas las rongeurs desmontables con mango de los forceps y tornillo.



2. Introduzca el deslizador (5) en el eje. Para ello, hay que tirar del deslizador (5) hacia atrás, hacia el mango de los alicates, de modo que las bocas queden abiertas al máximo. Sólo entonces se pueden insertar los pasadores guía del deslizador (6) en el carril guía del eje en la posición correcta.



3. Presione el deslizador (5) sobre el eje del cuerpo del rongeur (1) y, a continuación, empuje el deslizador (5) hacia la boca hasta el tope.

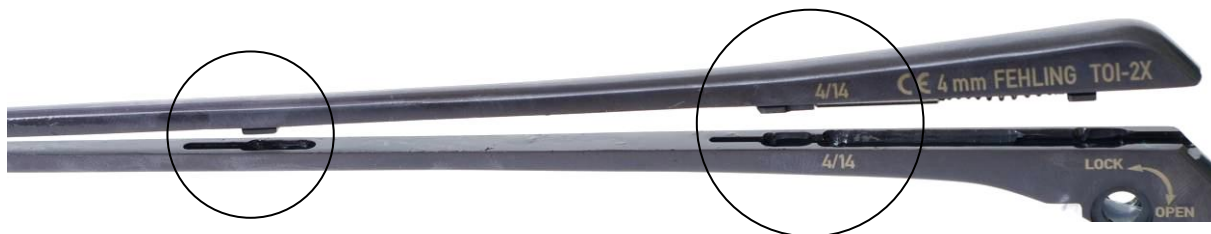

Los pasadores guía del deslizador (6) tienen que insertarse en los correspondientes soportes del eje del cuerpo del rongeur (1) (véase la ilustración detallada: arriba - pasadores guía, abajo - soporte en el eje).

4. Con el deslizador (5) y el eje en la misma posición, introduzca la parte móvil del mango de los alicates (3) en el cuerpo de la rongeur (1). Asegúrese de que los orificios de la parte móvil del mango de los alicates (4) y el cuerpo del rongeur (2) están alineados con precisión.



5. A continuación, introduzca el tornillo de hexágono interior (7) en el orificio y apriételo en sentido antihorario con el destornillador sin aplicar fuerza.



6. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

	• Estos tornillos hexagonales interiores tienen rosca a la izquierda. Por favor, tenga en cuenta el sentido de giro al aflojar y cerrar los tornillos hexagonales interiores. • No emplee fuerza al aflojar y cerrar el tornillo de hexagonal interior, ya que no es necesaria. Girar el tornillo a la fuerza dañará el perfil hexagonal interior. • Si se detectan daños en el perfil del hexágono interior o en el perfil del destornillador, sustituya inmediatamente el tornillo hexágono interior y el destornillador o encargue su sustitución al fabricante. • El destornillador TXX-0X puede lavarse con agua fría y un detergente suave. No es adecuado para la limpieza en agua caliente ni para la esterilización por vapor a 134 °C.
---	---

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	---	---