

FEHLING CERAMO RONGEURS – FORCEPSGREEP MET SCHROEF

1) Bestanddelen / verklarende basis



2) Demontage

1. Plaats de rongeur op een stevig werkoppervlak voor demontage. Draai de binnenzeskantschroef (7) met behulp van de schroevendraaier TXX-0X rechtsonder (als alternatief de steriliseerbare schroevendraaier TXW-9X) en verwijder deze uit het schroefgat.
2. Trek de beweegbare forcepsgreep (3) naar beneden uit de rongeurbehuizing (1).



3. Trek de schuiver (5) zo ver mogelijk in de richting van het vaste forcepsgreepdeel van de rongeurbehuizing (1) totdat de bek volledig geopend is. Los vervolgens de geleidepennen van de schuiver (6) uit de geleiderail van de rongeur (1) naar boven.



4. Klap de schuiver (5) omhoog om voldoende ruimte te creëren tussen de schuiver (5) en de schacht van de rongeur (1). Zorg ervoor dat de bek volledig open is. Reinig de rongeur in deze positie.



De schuiver (5) is stevig verbonden met de schacht van de rongeurbehuizing (1) door het scharnier van de bek. Zijdelingse verplaatsing van de schuiver (5) in de open positie leidt tot vervorming of zelfs breuk van het scharnier of de geleidepen van de schuiver (6).

3) Montage


1. De rongeurbehuizing (1) en het beweegbare forcepsgreepdeel (3) hebben een identiek instrumentnummer (8), bijvoorbeeld X20K553WM28. Alleen instrumentonderdelen met hetzelfde instrumentnummer (8) mogen worden samengebouwd. De binnenzeskantschroeven (7) zijn universeel geschikt voor alle demonteerbare rongeurs met forcepsgreep en schroef.



2. Beweeg de schuiver (5) omlaag op de schacht. De schuif (5) moet teruggetrokken worden naar de forcepsgreep zodat de bek maximaal geopend is. Alleen dan kunnen de geleidepennen van de schuiver (6) in de juiste positie in de geleiderail van de schacht worden geplaatst.



3. Druk de schuiver (5) op de schacht van de rongeur (1) en duw de schuiver (5) naar de bek tot aan de aanslag.f

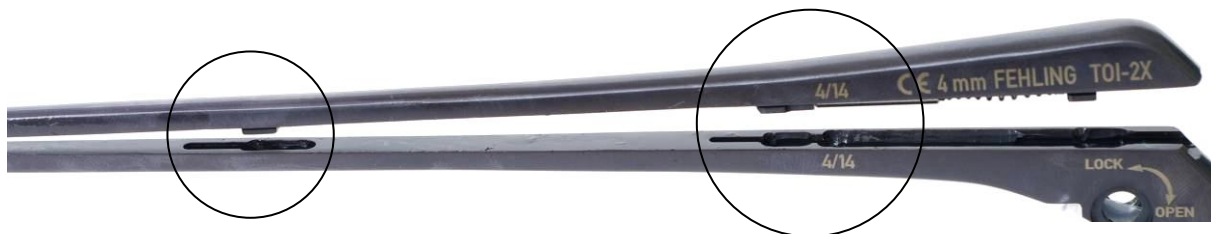

De geleidepennen van de schuiver (6) moeten in de overeenkomstige zittingen in de schacht van de rongeur (1) worden gestoken (zie gedetailleerde illustratie: boven - geleidepennen, onder - zittingen in de schacht).

4. Duw met de schuiver (5) en de as in dezelfde positie, het beweegbare forcepsgreepdeel (3) in de rongeurbehuizing (1). Zorg ervoor dat de gaten van het beweegbare forcepsgreepdeel (4) en de rongeurbehuizing (2) precies uitgelijnd zijn.



5. Steek vervolgens de binnenzeskantschroef (7) in het gat en draai deze met de schroevendraaier zonder kracht uit te oefenen linksom vast.



6. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

	• Deze binnenzeskantschroeven hebben linkse schroefdraad. Let op de draairichting wanneer u de binnenzeskantschroeven los- en vastdraait. • Gebruik geen kracht bij het los- en vastdraaien van de binnenzeskantschroef, want dat is niet nodig. Als u de schroef met geweld draait, wordt het binnenzeskantprofiel beschadigd. • Als er schade aan het binnenzeskantprofiel of het schroevendraaierprofiel kan worden vastgesteld, vervang de binnenzeskantschroef en de schroevendraaier dan onmiddellijk of laat ze vervangen door de fabrikant. • De schroevendraaier TXX-0X kan worden gewassen met koud water en een mild schoonmaakmiddel. Hij is niet geschikt voor reiniging in heet water en stoomsterilisatie bij 134 °C.
---	---

Symbolen		
Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	