




Kleszcze FEHLING CERAMO – UCHWYT PIERŚCIENIOWY Z PAWIM OCZKIEM

1) Elementy składowe / podstawa opisu

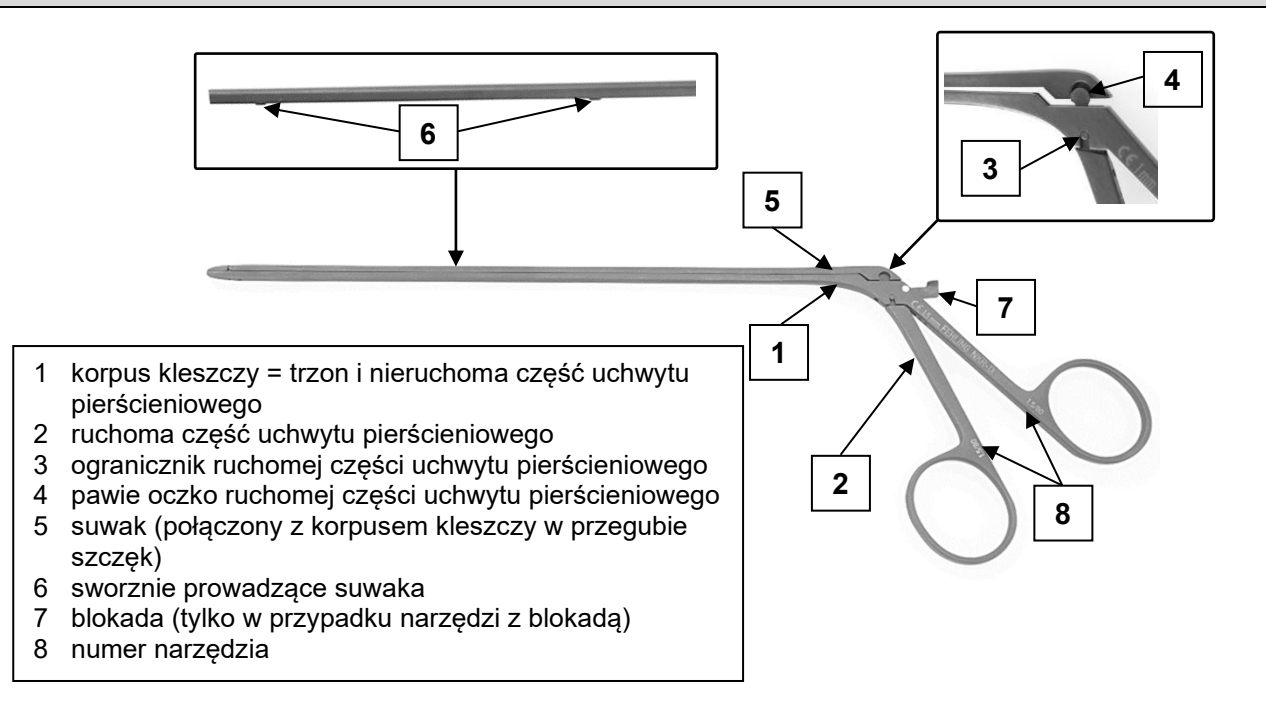

2) Demontaż

- Dotyczy narzędzi z blokadą (np. NKR-1Y):**
 Przed przystąpieniem do 2. kroku demontażu otworzyć blokadę (7) z tyłu korpusu kleszczy (1), obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Chwycić zamknięte kleszcze (szczęki są zamknięte) oburącz i ostrożnie wypchnąć suwak (5) z prowadnicy, naciskając kciukiem lewej ręki.
- Przesunąć suwak (5) do tyłu, aż pawie oczko ruchomej części uchwytu pierścieniowego (4) odłączy się od mocowania w suwaku (5).

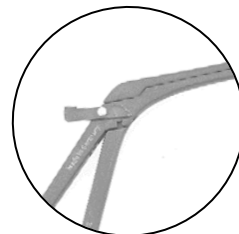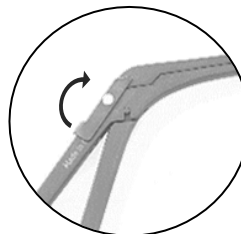

4. Przesunąć suwak (5) do góry i odłożyć go luźno na pawim oczku ruchomej części uchwyty pierścieniowego (4).




5. Wyciągnąć ruchomą część uchwyty pierścieniowego (2) w dół z korpusu kleszczy (1).



6. Pociągnąć suwak (5) do oporu w kierunku nieruchomej części uchwyty pierścieniowego korpusu kleszczy (1), aż do całkowitego rozwarcia szczęk. Następnie odłączyć sworznie prowadzące suwaka (6) od szyny prowadzącej w korpusie kleszczy (1), pociągając je do góry.



7. Odchylić suwak (5) w górę, aby uzyskać wystarczający odstęp między suwakiem (5) a trzonem korpusu kleszczy (1). Należy upewnić się, że szczęki są całkowicie rozwarne. Wyczyścić kleszcze w tej pozycji.

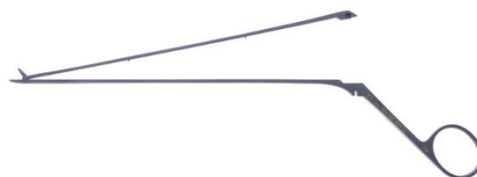

Suwak (5) jest na stałe połączony z trzonem korpusu kleszczy (1) za pomocą przegubu szczęk. Przesunięcie suwaka (5) w bok w pozycji otwartej prowadzi do deformacji lub nawet pęknięcia przegubu lub sworzni prowadzącego suwaka (6).

3) Montaż


1. Korpus kleszczy (1) i ruchoma część uchwyty pierścieniowego (2) mają identyczny numer narzędzia (8), np. X20K553WM28. Należy montować wyłącznie części narzędzia oznaczone tym samym numerem (8).



2. Chwycić kleszcze oburącz i złożyć suwak (5) w kierunku trzonu korpusu kleszczy (1). Jednocześnie pociągnąć suwak (5) w kierunku nieruchomej części uchwyty pierścieniowego korpusu kleszczy (1), aż do całkowitego rozwarcia szczęk kleszczy.



3. Wcisnąć suwak (5) na trzon korpusu kleszczy (1), a następnie przesunąć go do oporu w kierunku szczęk, aż do ich zamknięcia.

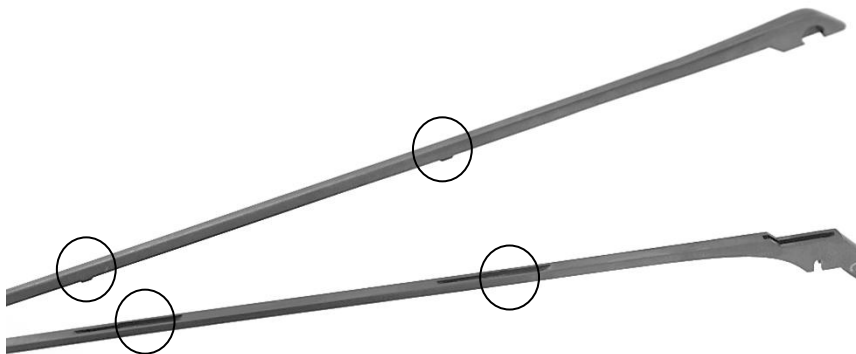

Sworznie prowadzące suwaka (6) należy umieścić w odpowiednich mocowaniach w trzonie korpusu kleszczy (1) (patrz rysunek szczegółowy: na górze – sworznie prowadzące, na dole – mocowanie w trzonie).



4. Odłożyć suwak (5) luźno na trzonie korpusu kleszczy (1) i włożyć ruchomą część uchwyty pierścieniowego (2) do korpusu kleszczy (1) od dołu, aż ogranicznik ruchomej części uchwyty pierścieniowego (3) zatrzyma się w mocowaniu w korpusie kleszczy (1).



5. Ostrożnie wysunąć suwak (5) z prowadnicy korpusu kleszczy (1) i przesunąć go w kierunku trzonu korpusu kleszczy (1), aż pawie oczko ruchomej części uchwyty pierścieniowego (4) zatrzaśnie się w mocowaniu w suwaku.



6. **Dotyczy narzędzi z blokadą (np. NKR-1Y):** Przed przystąpieniem do kroku 7 demontażu należy zamknąć blokadę (7) z tyłu korpusu kleszczy (1), obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

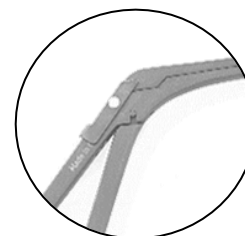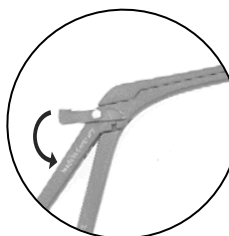

7. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	