




FEHLING CERAMO RONGEUR - MANICO AD ANELLO CON OCCHIO DI PAVONE

1) Componenti / base della dichiarazione

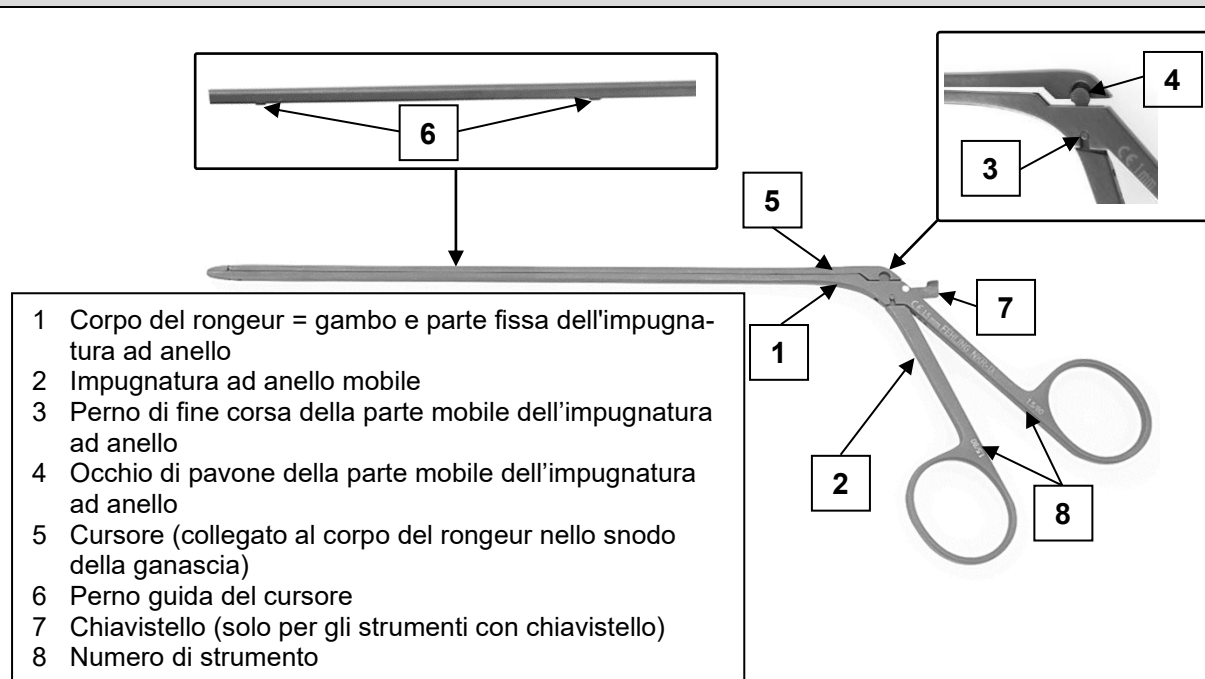

2) Smontaggio

- Per gli strumenti con chiavistello (ad es. NKR-1Y):** Prima della fase 2 dello smontaggio, aprire il chiavistello (7) sulla parte posteriore del corpo del rongeur (1) ruotandolo in senso orario.
- Prendere il rongeur chiuso (la ganascia è chiusa) con entrambe le mani e spingere delicatamente il cursore (5) fuori dall'asse di guida con il pollice della mano sinistra.
- Spingere il cursore (5) all'indietro finché l'occhio di pavone della parte mobile della maniglia ad anello (4) non si libera dalla sua sede nel cursore (5).

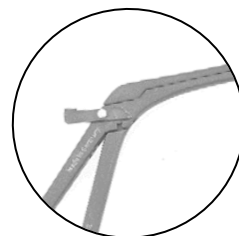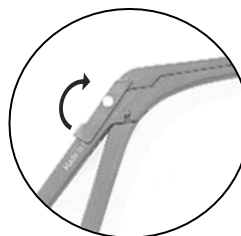

4. Far scorrere il cursore (5) verso l'alto e farlo aderire all'occhio di pavone della parte mobile dell'impugnatura ad anello (4).




5. Estrarre la parte mobile dell'impugnatura ad anello (2) verso il basso dal corpo del rongeur (1).



6. Tirare il cursore (5) fino all'arresto in direzione della parte fissa dell'anello di presa del corpo del rongeur (1) fino alla completa apertura della bocca. Quindi rilasciare i perni guida del cursore (6) verso l'alto dalla guida del corpo del rongeur (1).



7. Piegarle il cursore (5) verso l'alto per creare uno spazio sufficiente tra il cursore (5) e il gambo del corpo del rongeur (1). Assicurarsi che la bocca sia completamente aperta. Pulire il rongeur in questa posizione.

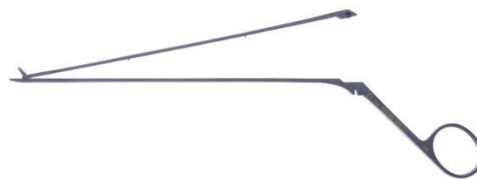

Il cursore (5) è saldamente collegato al gambo del corpo del rongeur (1) tramite lo snodo della ganaschia. Lo spostamento laterale del cursore (5) in posizione aperta porta alla deformazione o addirittura alla rottura dello snodo o del perno di guida del cursore (6).

3) Montaggio


1. Il corpo del rongeur (1) e la parte mobile dell'impugnatura ad anello (2) hanno un numero di strumento identico (8), ad esempio X20K553WM28. È possibile assemblare solo parti di strumenti con lo stesso numero di strumento (8).



2. Prendere il rongeur con entrambe le mani e piegare il cursore (5) verso il basso, in direzione del gambo del corpo del rongeur (1). Allo stesso tempo, tirare il cursore (5) in direzione della parte fissa della presa ad anello del corpo del rongeur (1) in modo che la ganascia del rongeur si apra completamente.



3. Premere il cursore (5) sul gambo del corpo del rongeur (1) e quindi spingerlo fino alla chiusura in direzione della ganascia.

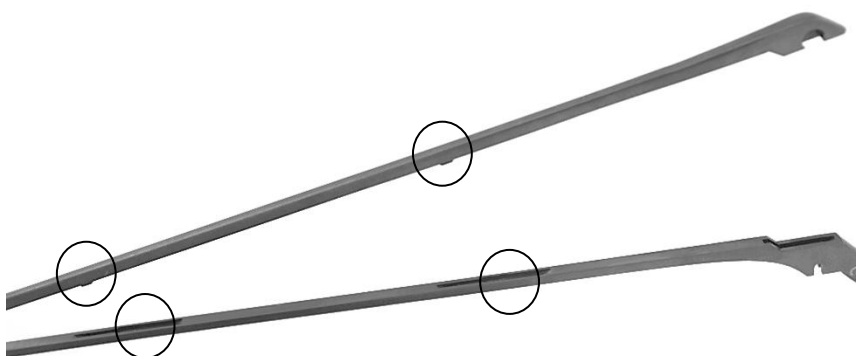

I perni guida del cursore (6) devono essere inseriti nelle prese corrispondenti nel gambo del corpo del rongeur (1) (vedere l'illustrazione dettagliata: in alto - perni guida, in basso - supporti nel gambo).



4. Lasciare che il cursore (5) appoggi liberamente sul gambo del corpo del rongeur (1) e inserire la parte mobile dell'impugnatura ad anello (2) nel corpo del rongeur (1) dal basso fino a quando il perno di fine corsa della parte mobile dell'impugnatura ad anello (3) si ferma nella sua sede nel corpo del rongeur (1).



5. Spingere delicatamente il cursore (5) fuori dall'asse di guida del corpo del rongeur (1) e spostarlo in direzione del gambo del corpo del rongeur (1) fino a quando l'occhio di pavone della parte mobile dell'impugnatura ad anello (4) si innesta nel suo supporto nel cursore.



6. **Per gli strumenti con chiavistello (ad es. NKR-1Y):** Prima della fase 7. di montaggio, posizionare il chiavistello (7) sulla parte posteriore del corpo del rongeur (1) in senso antiorario per chiuderlo.

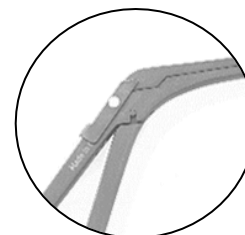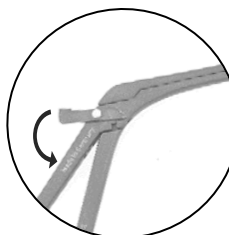

7. Lo strumento assemblato è ora pronto per l'uso dopo un test funzionale.

Simboli

Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabbricante	 Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificativo unico del dispositivo	 Marcatura CE
 Lattina d'olio per le aree da lubrificare	 Marcatura CE	

Contattare il fabbricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	--	---