


FEHLING CERAMO RONGEURS – RINGGREEP MET PAUWENOOG


1) Bestanddelen / verklarende basis

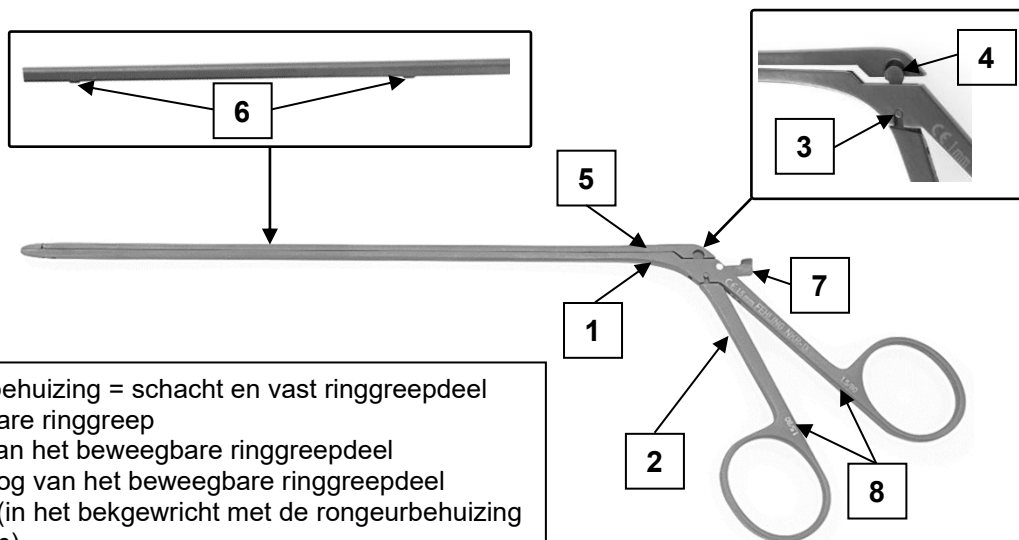

- 1 Rongeurbehuizing = schacht en vast ringgreepdeel
- 2 Beweegbare ringgreep
- 3 Eindpin van het beweegbare ringgreepdeel
- 4 Pauwenoog van het beweegbare ringgreepdeel
- 5 Schuiver (in het bekgewricht met de rongeurbehuizing verbonden)
- 6 Geleidepen van de schuiver
- 7 Grendel (alleen voor instrumenten met grendel)
- 8 Instrumentnummer

2) Demontage

1. **Voor instrumenten met grendel (bijv. NKR-1Y):** Open voor stap 2 van de demontage de grendel (7) op het achterste deel van de rongeurbehuizing (1) door deze rechtsonder te draaien.

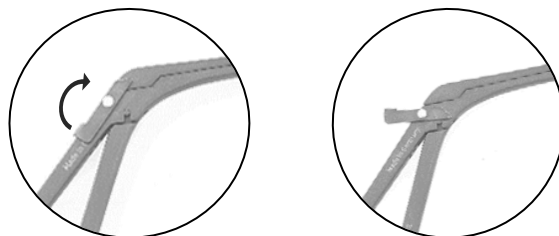

2. Neem de gesloten rongeur (bek is dicht) in beide handen en duw de schuif (5) voorzichtig uit de geleideras met de duim van je linkerhand.



3. Duw de schuiver (5) naar achteren totdat het pauwenoog van het beweegbare ringgreepdeel (4) loskomt van zijn zitting in de schuiver (5).



- Schuif de schuiver (5) omhoog en laat hem losjes op het pauwenoo van het beweegbare ringgreepdeel (4) rusten.




- Trek het beweegbare tanggreepdeel (2) naar beneden uit de rongeurbehuizing (1).



- Trek de schuiver (5) zo ver mogelijk in de richting van het vaste ringgreepdeel van de rongeurbehuizing (1) totdat de bek volledig open is. Los vervolgens de geleidepennen van de schuiver (6) uit de geleiderail van de rongeurbehuizing (1) naar boven.



- Klap de schuiver (5) omhoog om voldoende ruimte te creëren tussen de schuiver (5) en de schacht van de rongeurbehuizing (1). Zorg ervoor dat de bek volledig open is. Reinig de rongeurbehuizing in deze positie.

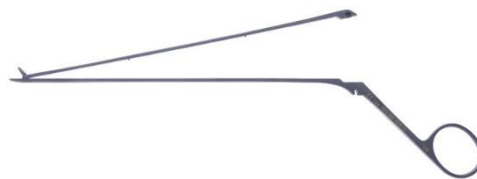

De schuiver (5) is stevig verbonden met de schacht van de rongeurbehuizing (1) door het scharnier van de bek. Zijdelingse verplaatsing van de schuiver (5) in de open positie leidt tot vervorming of zelfs breuk van het scharnier of de geleidepen van de schuiver (6).

3) Montage


- De rongeurbehuizing (1) en het beweegbare ringgreepdeel (2) hebben een identiek instrumentnummer (8), bijvoorbeeld X20K553WM28. Alleen instrumentonderdelen met hetzelfde instrumentnummer (8) mogen worden samengebouwd.



- Neem de rongeurbehuizing met beide handen vast en klap de schuiver (5) naar beneden in de richting van de schacht van de rongeurbehuizing (1). Trek tegelijkertijd de schuiver (5) in de richting van het vaste ringgreepdeel van het sponslichaam (1) zodat de bek van de spons volledig opent.



3. Druk de schuiver (5) op de schacht van de rongeur (1) en duw deze dan zo ver mogelijk in de richting van de bek tot aan de aanslag.

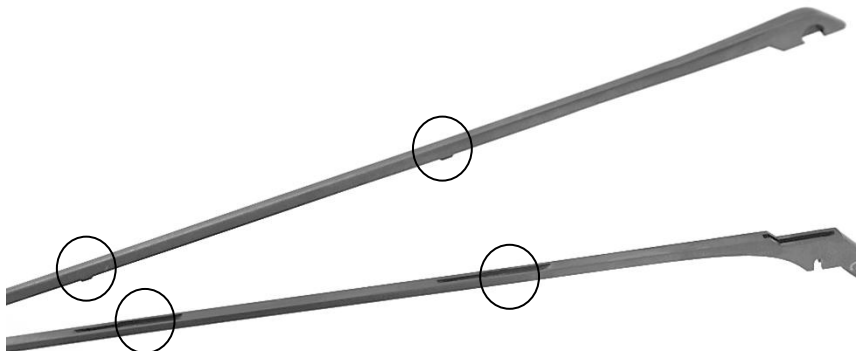

De geleidepennen van de schuiver (6) moeten in de overeenkomstige zittingen in de schacht van de rongeur (1) worden gestoken (zie gedetailleerde illustratie: boven - geleidepennen, onder - zittingen in de schacht).


4. Laat de schuiver (5) losjes op de schacht van de rongeurbehuizing (1) rusten en steek het beweegbare ringgreepdeel (2) van onderaf in de rongeurbehuizing (1) tot de eindpin van het beweegbare ringgreepdeel (3) in zijn zitting in de rongeurbehuizing (1) aanslaat.



5. Duw de schuiver (5) voorzichtig uit de geleidingsas van de rongeurbehuizing (1) en beweeg hem in de richting van de schacht van de rongeurbehuizing (1) tot het pauwenoo van het beweegbare ringgreepdeel (4) in zijn zitting in de schuiver grijpt.



6. **Voor instrumenten met grendel (bijv. NKR-1Y):** Plaats voor stap 7. van de montage de grendel (7) op het achterste deel van de rongeurbehuizing (1) linksom om te sluiten.

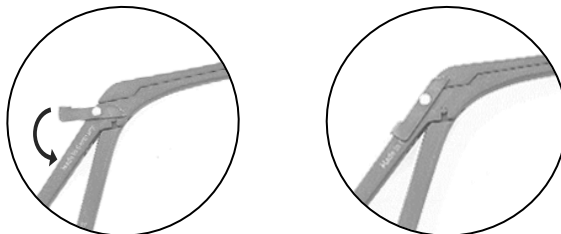

7. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 CE-markering
---	---	---