


ASPIRADOR CON CONEXIÓN CIERRE LUER EXTRAÍBLE (CONEXIÓN LL)

Válido para todos los aspiradores con conexión LL desmontable

1) Componentes / Base explicativa


Ejemplar: MRK-5

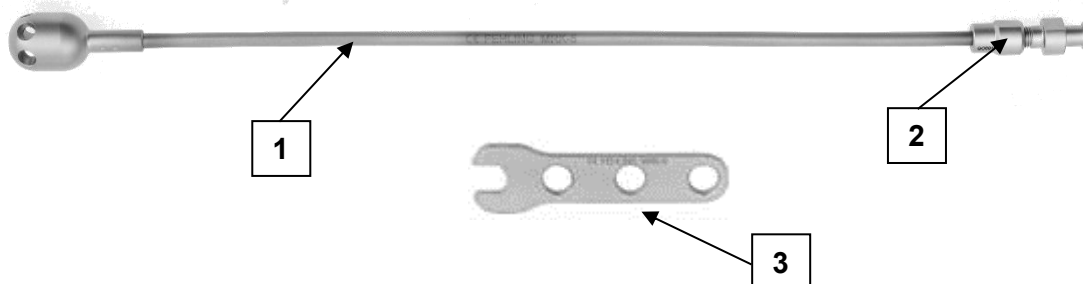


- 1 Aspirador
- 2 Conexión LL desmontable
- 3 Llave inglesa (p. ej. llave de estrella MRK-6)

2) Desmontaje

1. Para desmontarla, sujete la conexión LL (2) con dos llaves inglesas (3) y afloje la tuerca de unión de la parte interior girándola en sentido antihorario.
2. Retire la conexión LL (2) del manguito del aspirador (1).
3. La conexión LL (2) consta de dos partes, una rosca de soporte ranurada y una tuerca de unión. Para separar las dos partes, gire la tuerca de unión en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda retirarse.
4. La conexión LL, desmontada en sus piezas individuales, puede reprocesarse ahora.

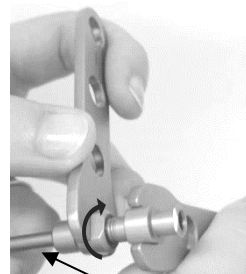

Tuerca de unión

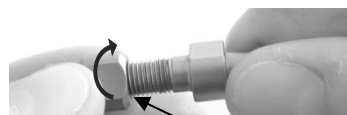

Tuerca de unión



3) Montaje

1. Para instalarla, deslice la tuerca de unión de la conexión LL (2) sobre el manguito del aspirador (1).




2. Coloque también la rosca de soporte ranurada de la conexión LL (2) en el manguito y empújela hasta el tope.



3. Deslice la tuerca de unión en la rosca de soporte ranurada y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope con dos llaves inglesas (3).

Tuerca de unión

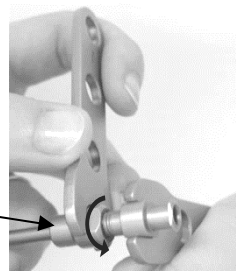

4. La conexión LL (2) está ahora firmemente conectada de nuevo al aspirador y lista para ser utilizada de nuevo tras una prueba de funcionamiento.



Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	--	---