


ASPIRATORE FEHLING CON ATTACCO LUER-LOCK RIMOVIBILE (ATTACCO LL)

Valido per tutti gli aspiratori con attacco LL rimovibile

1) Componenti / base della dichiarazione


A titolo di esempio: MRK-5

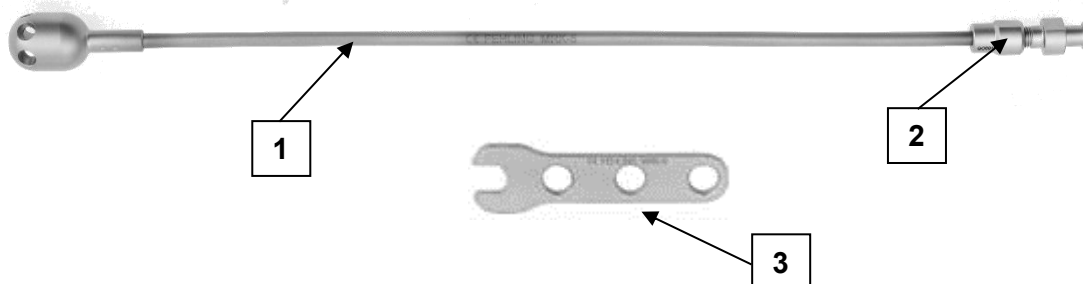


- 1 Aspiratori
- 2 Collegamento LL removibile
- 3 Chiave aperta (ad es. chiave da banco MRK-6)

2) Smontaggio

1. Per rimuoverlo, tenere il raccordo LL (2) con due chiavi a forchetta (3) e allentare il dado di raccordo all'interno ruotandolo in senso antiorario.
2. Rimuovere il raccordo LL (2) dal manicotto dell'aspiratore (1).
3. Il raccordo LL (2) è composto da due parti, una filettatura di montaggio scanalata e un dado di raccordo. Per separare le due parti, ruotare il dado di raccordo in senso antiorario fino a rimuoverlo.
4. Il raccordo LL, che è stato smontato nelle sue singole parti, può ora essere ricondizionato.

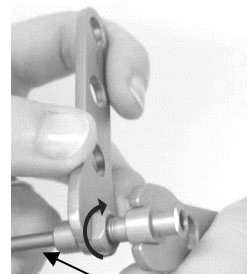

Dado di raccordo

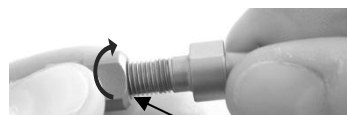

Dado di raccordo



3) Montaggio

1. Per il montaggio, far scorrere il dado di raccordo del raccordo LL (2) sul manicotto dell'aspiratore (1).




2. Posizionare anche la filettatura di montaggio scanalata del raccordo LL (2) sul manicotto e spingerla fino all'arresto.



3. Far scorrere il dado di raccordo sulla filettatura di montaggio scanalata e ruotare in senso orario fino all'arresto con due chiavi (3).

Dado di raccordo

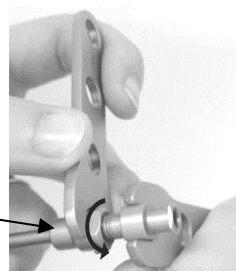

4. Il raccordo LL (2) è ora saldamente ricollegato all'aspiratore e pronto all'uso dopo un test di funzionamento.



Simboli		
Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabbricante	 Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Codice lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificativo unico del dispositivo	 Marcatura CE
 Lattina d'olio per le aree da lubrificare	 Marcatura CE	
Contattare il fabbricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	