


FEHLING ZUIGNAP MET VERWIJDERBARE LUER-LOCKAANSLUITING (LL-AANSLUITING)

Geldig voor alle zuigers met verwijderbare LL-aansluiting

1) Bestanddelen / verklarende basis


Als voorbeeld: MRK-5

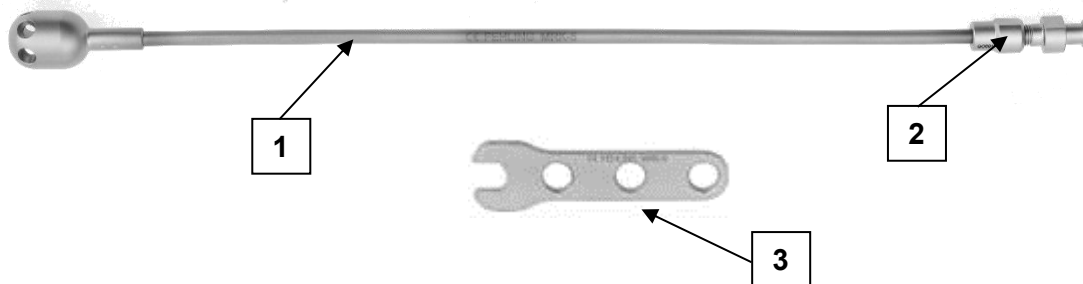

- 1 Zuiger
- 2 Verwijderbare LL-aansluiting
- 3 Steeksleutel (bijv. contrasleutel MRK-6)

2) Demontage

1. Hou om te verwijderen de LL-aansluiting (2) vast met twee steeksleutels (3) en draai de wartelmoer aan de binnenkant los door hem linksom te draaien.
2. Verwijder de LL-aansluiting (2) uit de huls van de zuignap (1).
3. De LL-aansluiting (2) bestaat uit twee delen, een gegleufde zittingsdraad en een wartelmoer. Om de twee delen te scheiden, draai de wartelmoer linksom totdat deze kan worden verwijderd.
4. De LL-verbinding, die uit elkaar is gehaald, kan nu worden herverwerkt.

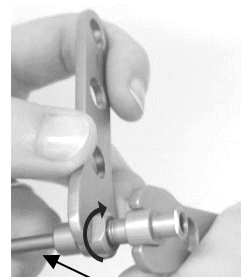

Wartelmoer



Wartelmoer



3) Montage

1. Om te installeren schuif de wartelmoer van de LL-aansluiting (2) over de huls van de zuignap (1).




2. Plaats ook de gegleufde montagedraad van de LL-aansluiting (2) op de huls en schuif hem tot aan de aanslag.



3. Schuif de wartelmoer op de gegleufde montagedraad en draai met twee steeksleutels (3) rechtsom tot de aanslag.

Wartelmoer

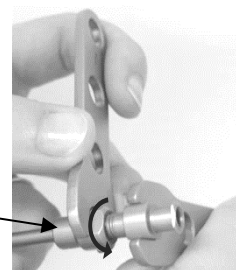

4. De LL-aansluiting (2) is nu weer stevig aangesloten op de zuignap en na een functietest weer klaar voor gebruik.



Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---