



FEHLING CERAMO RONGEUR - POIGNÉE ANNULAIRE AVEC UN ŒIL DE PAON

1) Composants / base de la déclaration

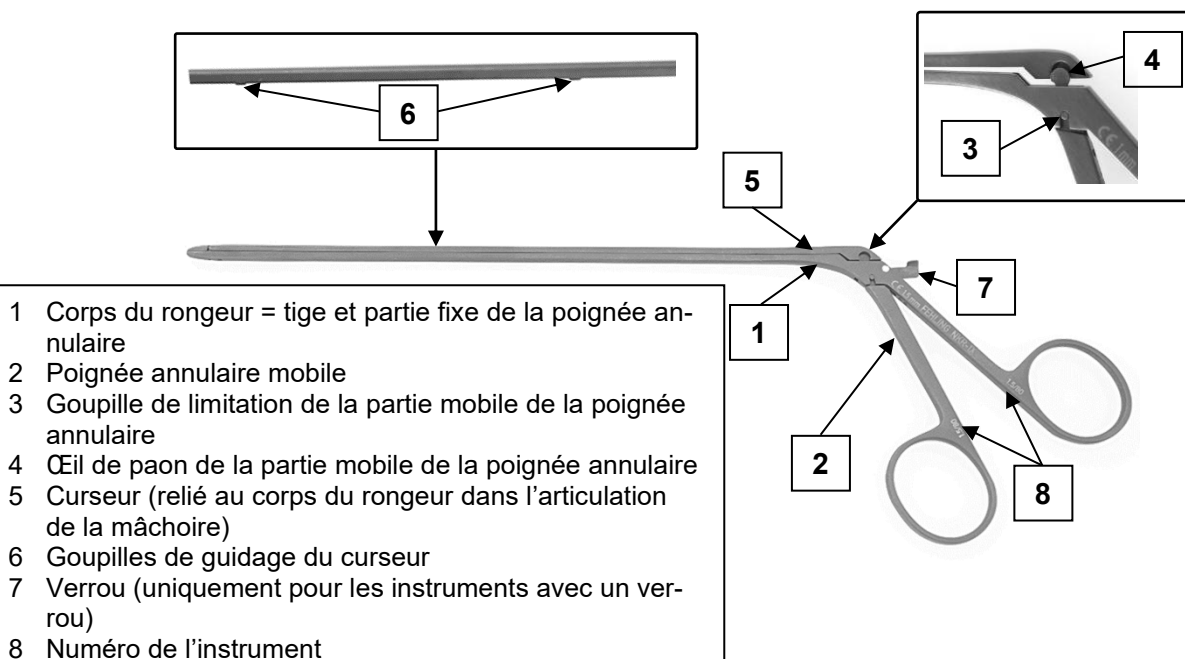

2) Démontage

1. **Pour les instruments avec un verrou (par exemple NKR-1Y) :** Avant l'étape 2 du démontage, ouvrir le verrou (7) situé à l'arrière du corps du rongeur (1) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

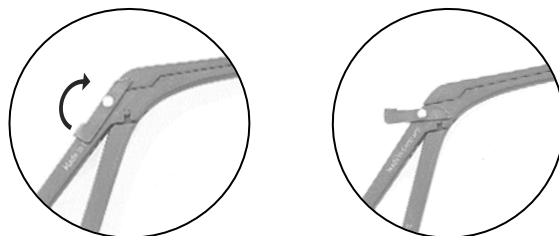

2. Prendre les rongeur fermés (la mâchoire est fermée) dans les deux mains et pousser doucement le curseur (5) hors de l'axe de guidage avec le pouce de la main gauche.



3. Pousser le curseur (5) vers l'arrière jusqu'à ce que l'œil de paon de la poignée annulaire mobile (4) se détache de son logement dans le curseur (5).



4. Faire glisser le curseur (5) vers le haut et le laisser reposer sans serrer sur l'œil de paon de la poignée annulaire mobile (4).




5. Retirer la partie mobile de la poignée annulaire (2) du corps du rongeur (1) en la tirant vers le bas.



6. Tirer le curseur (5) jusqu'à la butée en direction de la partie fixe de la poignée annulaire du corps du rongeur (1), jusqu'à ce que la mâchoire soit complètement ouverte. Desserrer ensuite les goupilles de guidage du curseur (6) du rail de guidage du corps du rongeur (1) vers le haut.



7. Relever le curseur (5) afin d'obtenir un espace suffisant entre le curseur (5) et la tige du corps du rongeur (1). Veiller à ce que la mâchoire soit complètement ouverte. Nettoyer le rongeur dans cette position.

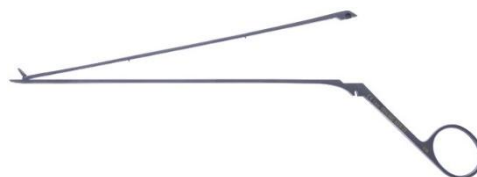


Le curseur (5) est relié la tige du corps du rongeur (1) grâce à l'articulation de la mâchoire. Un déplacement latéral du curseur (5) en position ouverte entraîne une déformation, voire une rupture de l'articulation ou de la goupille de guidage du curseur (6).

3) Montage

1. Le corps du rongeur (1) ainsi que la partie mobile de la poignée annulaire (2) ont un numéro d'instrument identique (8), par exemple X20K553WM28. Seules les parties de l'instrument ayant le même numéro d'instrument (8) peuvent être assemblées.



2. Prendre les rongeur dans les deux mains et rabattre le curseur (5) vers la tige du corps du rongeur (1). Tirer en même temps le curseur (5) en direction de la partie fixe de la poignée annulaire du corps du rongeur (1), afin que la mâchoire du rongeur s'ouvre complètement.
3. Appuyer sur le curseur (5) sur la tige du corps du rongeur (1), puis le pousser jusqu'à la butée en direction de la mâchoire, jusqu'à ce qu'elle se ferme.

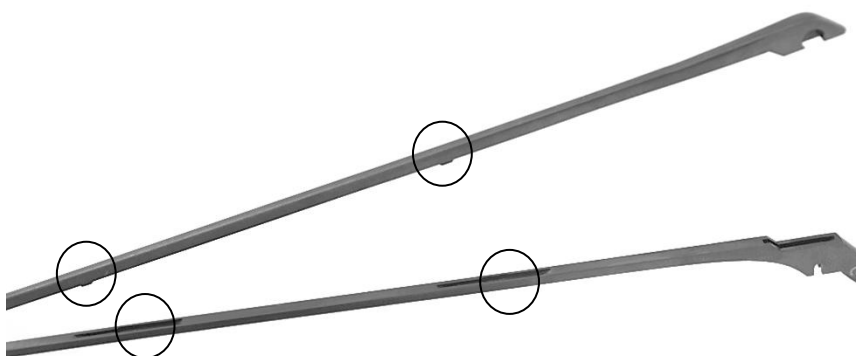

Les goupilles de guidage du curseur (6) doivent s'insérer dans les logements correspondants de la tige du corps du rongeur (1) (consulter l'illustration détaillée : en haut - goupilles de guidage, en bas - logements dans la tige).



4. Laisser le curseur (5) reposer sans serrer sur la tige du corps du rongeur (1) et insérer la poignée annulaire mobile (2) par le bas dans le corps du rongeur (1) jusqu'à ce que la tige de limitation de la poignée annulaire mobile (3) vienne buter dans son logement dans le corps du rongeur (1).



5. Pousser doucement le curseur (5) hors de l'axe de guidage du corps du rongeur (1) tout en le déplaçant en direction de la tige du corps du rongeur (1) jusqu'à ce que l'œil de paon de la poignée annulaire mobile (4) s'enclenche dans son logement dans le curseur.



6. **Pour les instruments avec un verrou (par exemple NKR-1Y) :** Avant l'étape 7 du montage, placer le verrou (7) sur la partie arrière du corps du rongeur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fermer.

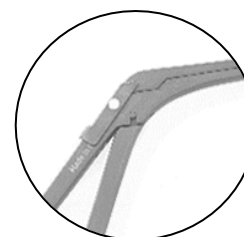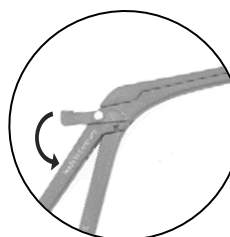

7. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Contactez le fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---