


FEHLING ASISTENTE DE NUDOS Y CALIBRADORES CORDALES

MNV-4, MNV-7, MNV-9



1) Componentes / Base explicativa

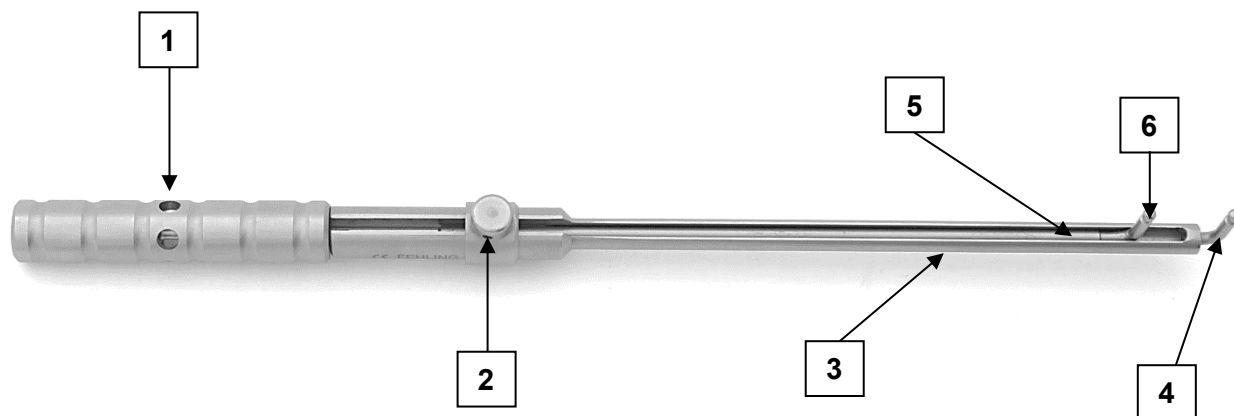

- 1 Mango del instrumento
- 2 Botón de desbloqueo
- 3 Eje del instrumento
- 4 Extremo de trabajo eje
- 5 Deslizador de instrumentos
- 6 Extremo de trabajo deslizador

2) Desmontaje


1. Gire el mango del instrumento (1) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta soltar el mango del instrumento (1) por completo.
2. En el siguiente paso, retire el deslizador del instrumento (5). Para ello, presione el botón de desbloqueo (2) hacia el eje y, al mismo tiempo, extraiga completamente el deslizador del instrumento (5) hacia el extremo del eje.
3. El instrumento, desmontado en sus tres partes individuales, ya puede procesarse.

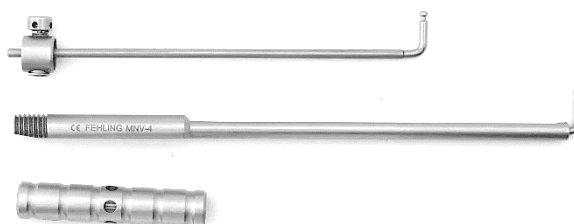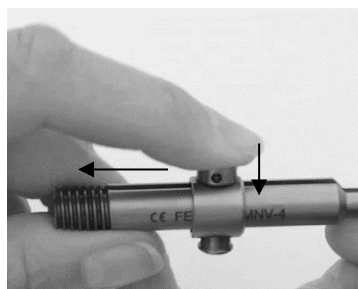

0

3) Montaje

1. Introduzca el deslizador del instrumento (5) en el extremo del eje y empújelo más allá de la rosca en dirección al extremo de trabajo (4). Mientras tanto, presione el botón de desbloqueo (2) hacia el eje.

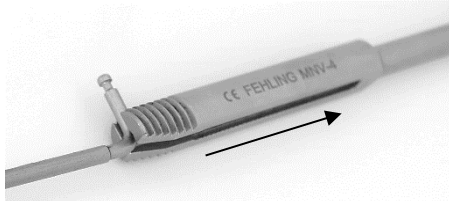


Asegúrese de que los extremos de trabajo del deslizador del instrumento (5) y del eje del instrumento (3) apuntan en la misma dirección.

2. Por último, gire el mango del instrumento (1) en el sentido de las agujas del reloj sobre la rosca del eje (3).



3. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

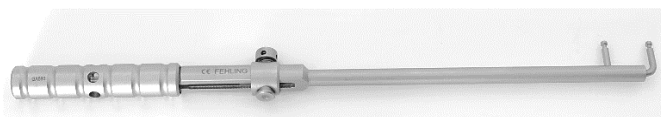

Símbolos		
Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	
Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	