


FEHLING CHORDAE-MÄTINSTRUMENT OCH KNUTASSISTENT

MNV-4, MNV-7, MNV-9



1) Komponenter / grund för deklaration

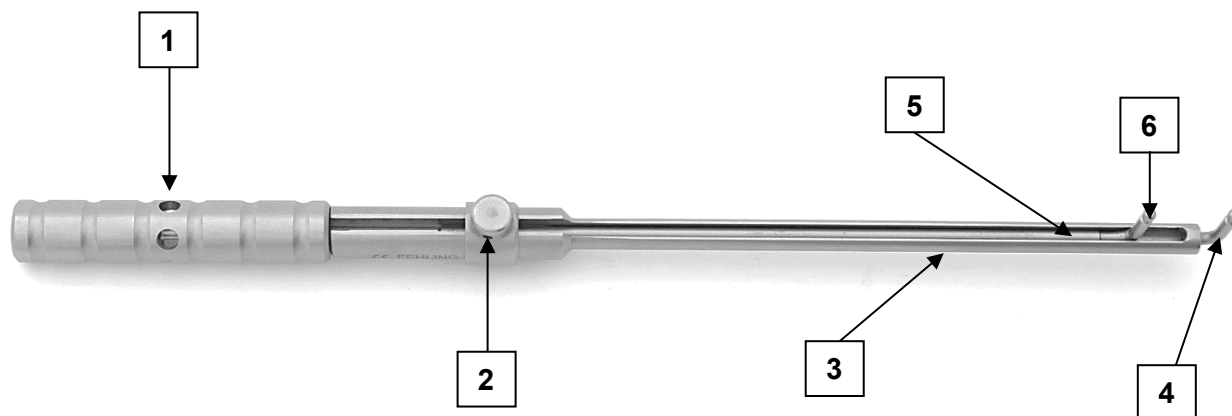

- 1 Instrumentgrepp
- 2 Upplåsningsknapp
- 3 Instrumentskaft
- 4 Skaftets arbetsände
- 5 Instrumentreglage
- 6 Skjutreglagets arbetsände


2) Demontering

1. Vrid instrumentgreppet (1) moturs tills instrumentgreppet (1) är helt upplåst.
2. I nästa steg tar du bort instrumentreglaget (5). För att göra detta trycker du in upplåsningsknappen (2) mot skaftet och drar samtidigt ut instrumentreglaget (5) helt mot skaftänden.
3. Instrumentet, som demonterats i sina tre enskilda delar, kan nu reprocessas.

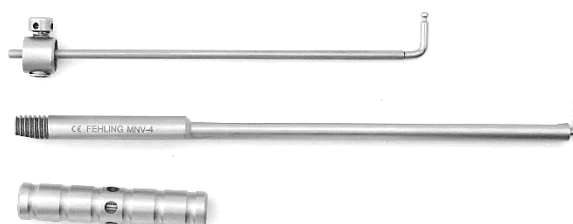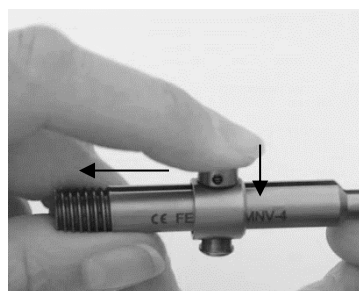

3) Montering

1. För in instrumentreglaget (5) i skaftänden och skjut det förbi gängen i riktning mot arbetsänden (4). Under tiden trycker du upplåsningsknappen (2) mot skaftet.

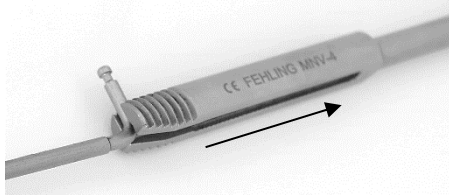


Se till att arbetsändarna på instrumentreglaget (5) och instrumentskaftet (3) pekar åt samma håll.

2. Vrid slutligen instrumentgreppet (1) medurs på axelgången (3).



3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

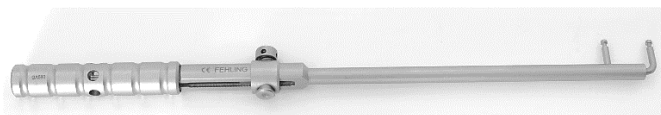

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	