


FEHLING OPERATIETAFEL-HOUDKLEM

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Bestanddelen / verklarende basis

Als voorbeeld: EEJ-1

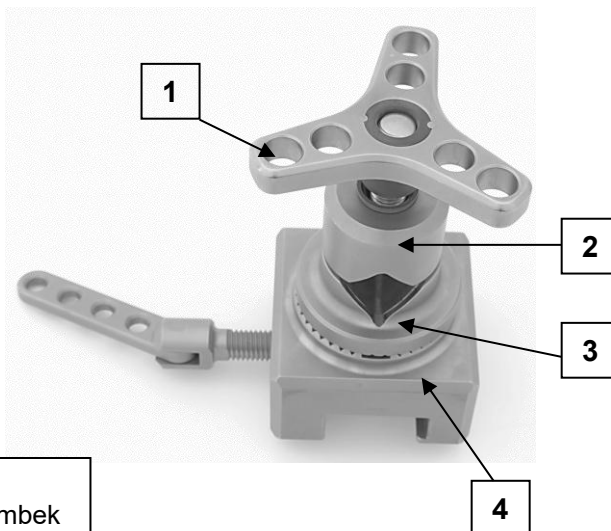


- 1 Stergreep
- 2 Bovenste deel van de klembek
- 3 Onderste deel van de klembek
- 4 Sokkel

2) Demontage

1. Draai de stergreep (1) linksom totdat deze kan worden verwijderd.




2. Trek eerst het bovenste deel van de klembek (2) van de schroefdraad van de sokkel (4) en verwijder dan het onderste deel van de klembek (3).

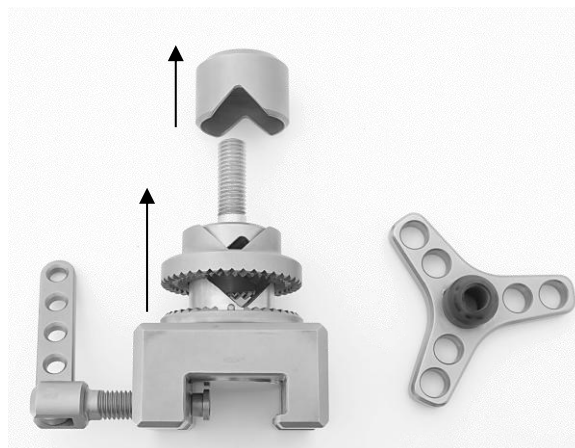

3. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

3) Montage

1. Plaats het onderste deel van de klembek (3) op de sokkel (4) en plaats dan het bovenste deel van de klembek (2) over de schroefdraad van de sokkel (4).

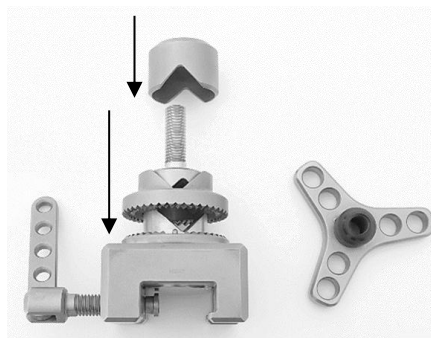

2. Plaats de stergreep (1) op de schroefdraad van de sokkel (4) en draai rechtsonom om vast te draaien.



3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

Symbolen		
Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	
Neem contact op met de fabrikant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	