


## CANNULE E ASPIRATORI CON CESTELLO RIMOVIBILE

Valido per tutte le cannule e gli aspiratori con cestello rimovibile

### 1) Componenti / base della dichiarazione


A titolo di esempio: MNM-3

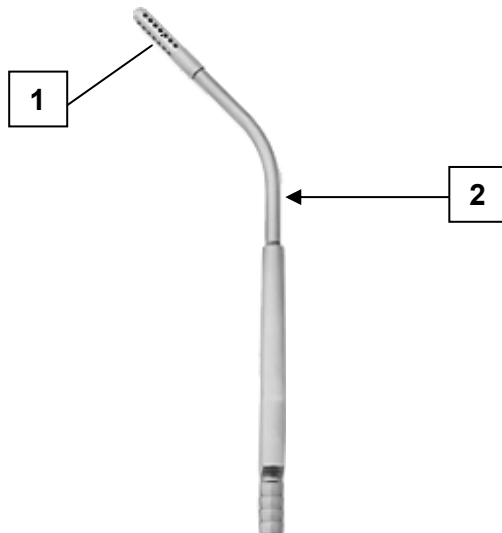

- 1 Cestello
- 2 Aspiratori/cannula


### 2) Smontaggio

1. Ruotare il cestello (1) sulla parte anteriore dell'aspiratore o della cannula (2) in senso antiorario fino a quando è possibile rimuoverlo dalla filettatura.
2. Lo strumento, smontato nelle sue singole parti, può ora essere ricondizionato.

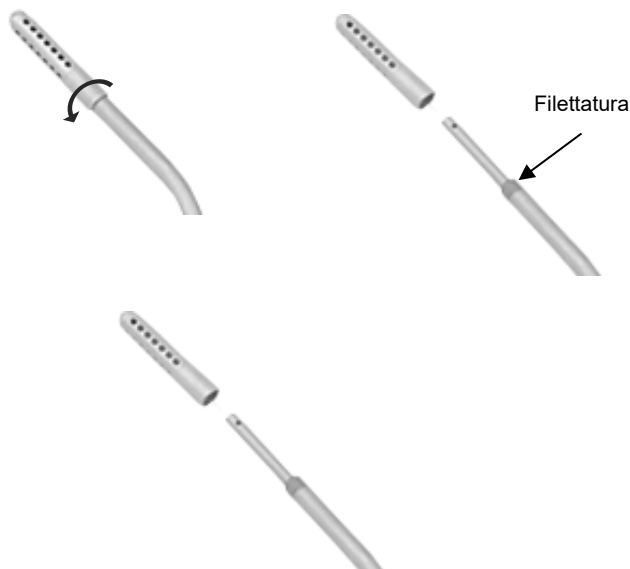

### 3) Montaggio

1. Posizionare il cestello (1) sulla filettatura della parte anteriore dell'aspiratore o della cannula (2) e ruotare in senso orario per stringere.

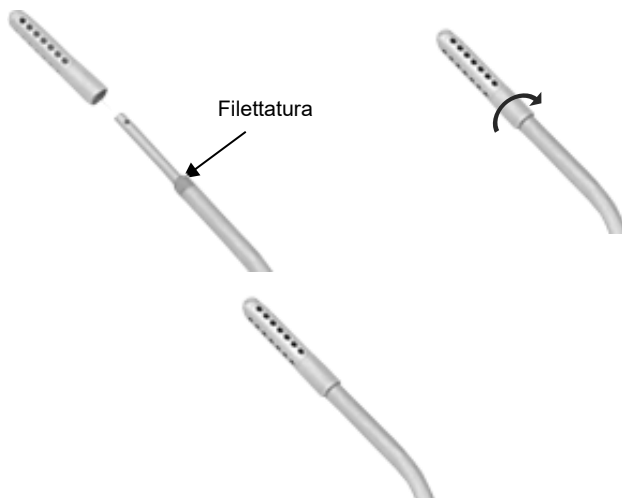

2. Lo strumento assemblato è ora pronto per l'uso dopo un test funzionale.

### Simboli

Se indicati sul dispositivo medico o sull'etichetta del dispositivo medico o sulle istruzioni per l'uso, i simboli hanno il seguente significato, in conformità alla norma DIN EN ISO 15223-1:

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fabbricante                               | <br>Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni elettroniche per l'uso | <br>Attenzione           |
| <br>Numero di catalogo                        | <br>Codice lotto                                                                         | <br>Numero di serie      |
| <br>Dispositivo medico                        | <br>Identificativo unico del dispositivo                                                 | <br>0297<br>Marcatura CE |
| <br>Lattina d'olio per le aree da lubrificare | <br>Marcatura CE                                                                         |                                                                                                               |

### Contattare il fabbricante

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FEHLING INSTRUMENTS GmbH<br>Seligenstädter Str. 100<br>63791 Karlstein/Germania<br>Tel.: +49 (0) 6188-9574-40<br>Fax: +49 (0) 6188-9574-45<br>E-Mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a><br><a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|