


FEHLING CANULES EN ZUIGNAPPEN MET VERWIJDERBARE KORF

Canules en zuignappen met verwijderbare korf

1) Bestanddelen / verklarende basis

Als voorbeeld: MNM-3

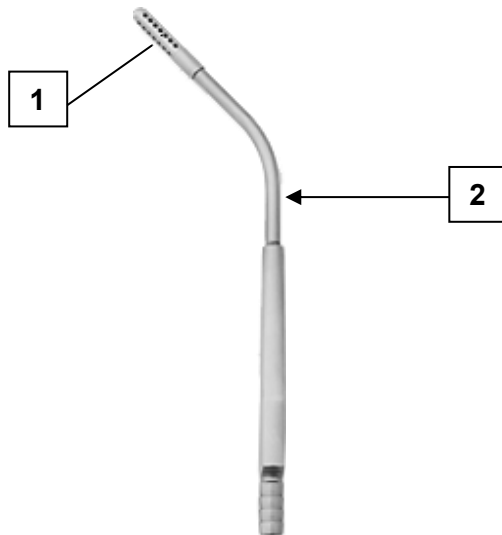

- 1 Korf
- 2 Zuignap/cannule

2) Demontage

1. Draai de korf (1) aan de voorkant van de zuignap of canule (2) linksom totdat deze van de schroefdraad kan worden verwijderd.




2. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.



3) Montage

1. Plaats de korf (1) op de schroefdraad aan de voorkant van de zuignap of canule (2) en draai rechtsom om vast te draaien.

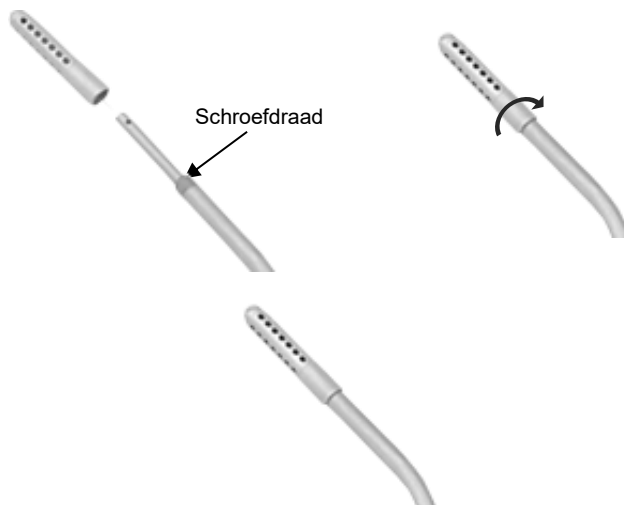

2. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	
Neem contact op met de fabrikant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	