


FEHLING CANULES ET VENTOUSES AVEC UN PANIER AMOVIBLE

Valable pour toutes les canules et ventouses avec un panier amovible

1) Composants / base de la déclaration

À titre d'exemple : MNM-3

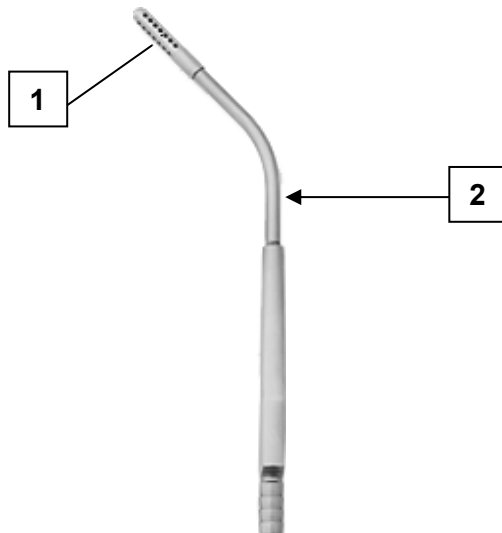

- 1 Panier
- 2 Ventouse/canule

2) Démontage

1. Tourner le panier (1) à l'avant de la ventouse ou de la canule (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré du filetage.




2. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.



3) Montage

1. Placer le panier (1) sur le filetage de la partie avant de la ventouse ou de la canule (2) et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.

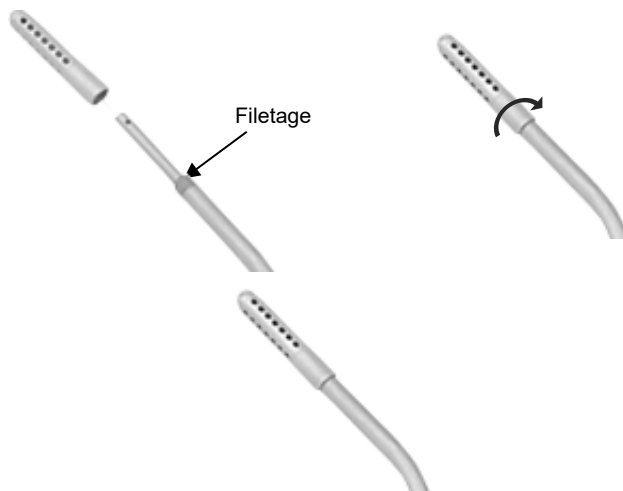

2. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	
Contacter le fabricant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
		