


CÁNULAS Y ASPIRADORES CON CESTA EXTRAÍBLE

Válido para todas las cánulas y aspiradores con cesta extraíble

1) Componentes / Base explicativa


Ejemplar: MNM-3

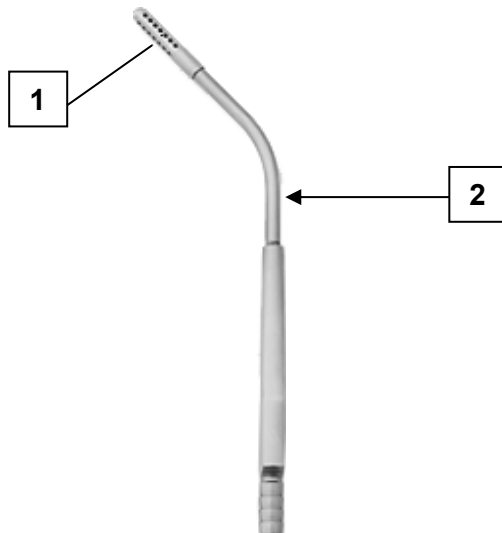

- 1 Cesta
- 2 Aspirador/cánula


2) Desmontaje

1. Gire la cesta (1) situada en la parte delantera del aspirador o cánula (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pueda extraer de la rosca.
2. El instrumento, desmontado en sus piezas individuales, ya puede reprocesarse.

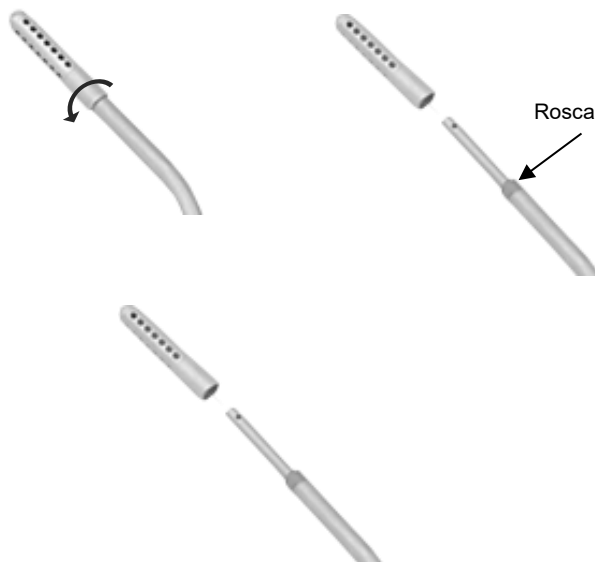

3) Montaje

1. Coloque la cesta (1) en la rosca de la parte delantera del aspirador o cánula (2) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

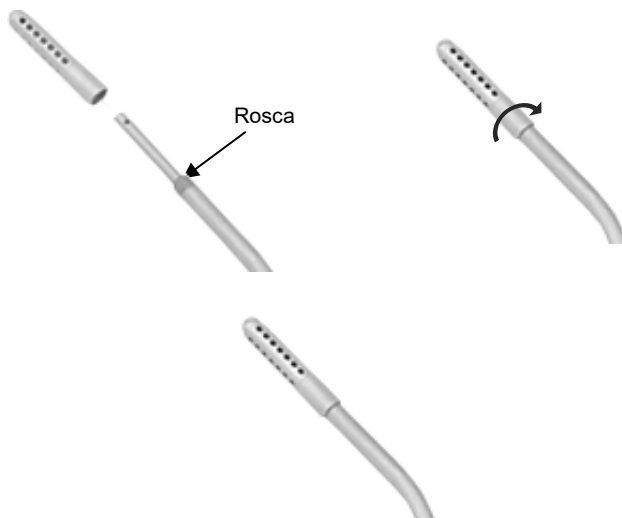

2. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
REF Número de catálogo	LOT Código de lote	SN Número de serie
MD Producto sanitario	UDI Identificador único del producto	
 Aceitera que indica los pun- tos a lubricar	 Marcado CE	
Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	