


FEHLING POIGNÉE AVEC UNE DOUILLE FILETÉE


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Composants / base de la déclaration

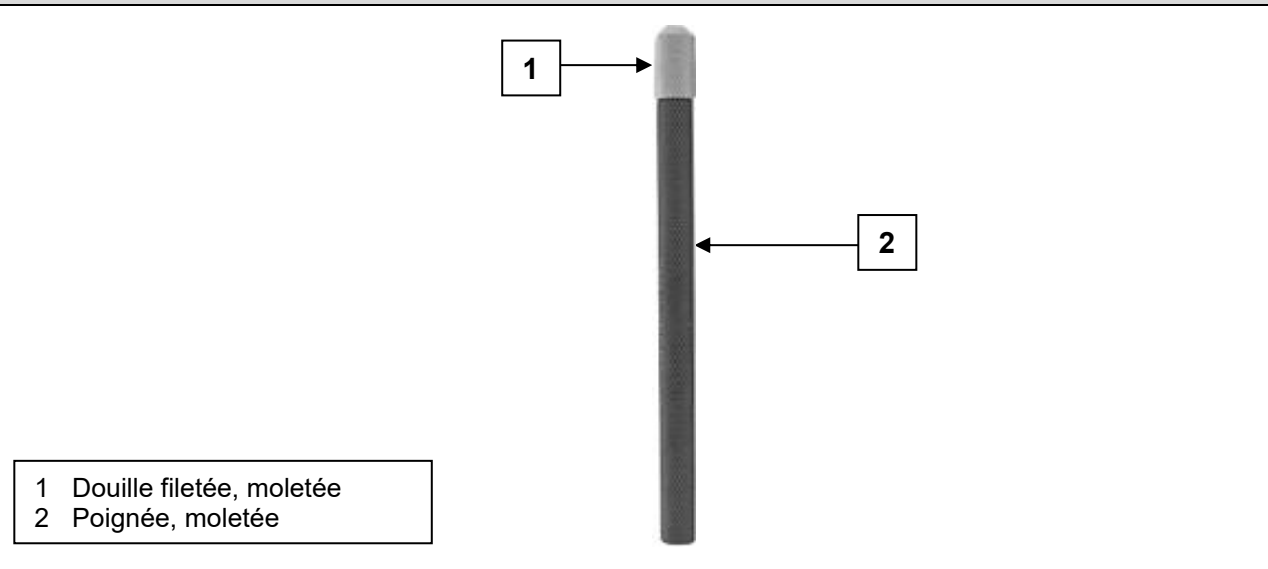

2) Démontage

1. Tourner la douille filetée (1) sur la partie avant de la poignée (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée du filetage.

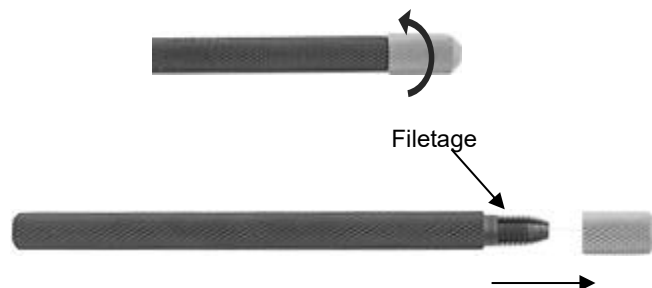


2. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.



Pour changer ou retirer la tige de la poignée (2), il suffit de desserrer la douille filetée (1).

3) Montage

1. Placer la douille filetée (1) sur le filetage de la partie avant de la poignée (2) et la serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.

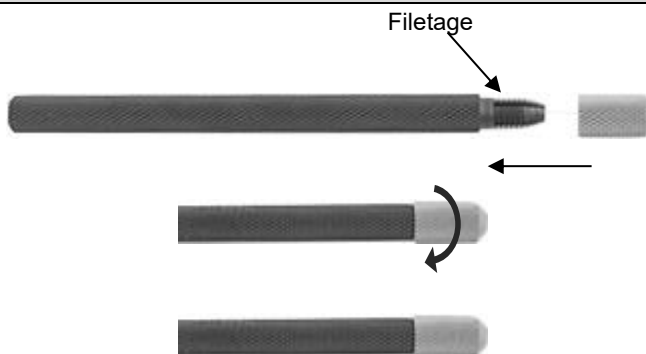

2. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.



Pour changer ou retirer la tige de la poignée (2), il suffit de desserrer la douille filetée (1).

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention	
REF Numéro du catalogue	LOT Code de lot	SN Numéro de série	
MD Dispositif médical	UDI Identifiant unique de dispositif	 Marquage CE	
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE		
Contacter le fabricant			
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de		