


FEHLING HAAKGELEIDERS (VOOR KOGELADAPTERS) EN GELEIDEFORCEPS

1a) Onderdelen / verklarende basis tweedelige instrumenten


Als voorbeeld: MRN-3A

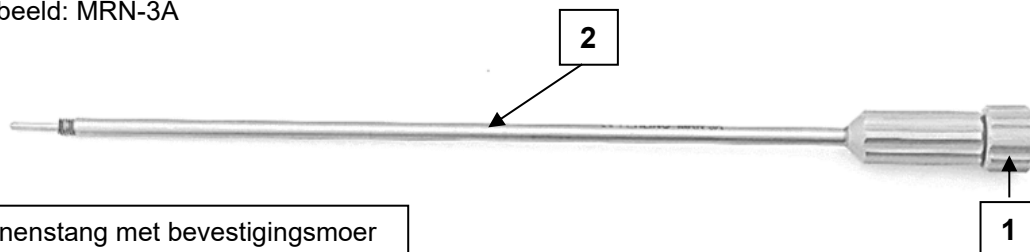

- 1 Binnenstang met bevestigingsmoer
- 2 Buitenste huls

1b) Onderdelen / verklarende basis driedelige instrumenten


Als voorbeeld: MRI-0

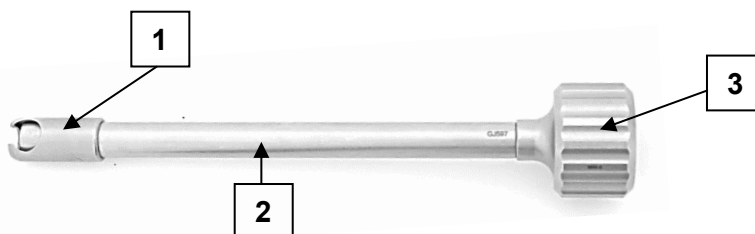


- 1 Binnenste stang
- 2 Buitenste huls
- 3 Bevestigingsmoer

2a) Demontage van tweedelige instrumenten

1. Draai de bevestigingsmoer (3) aan de binnenste stang (1) linksom totdat de schroefdraad volledig is losgedraaid en de binnenste stang (1) uit de buitenste huls (2) kan worden getrokken in de richting van de bevestigingsmoer (3).

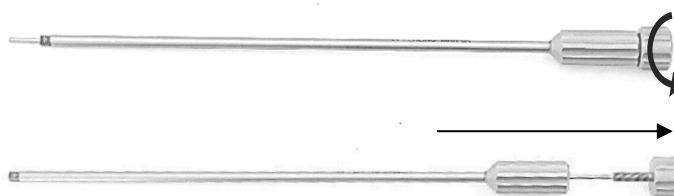

2. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

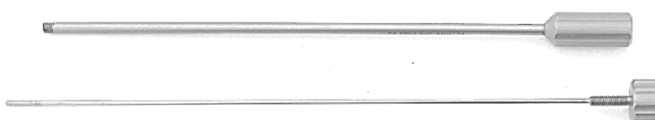

2b) Demontage van driedelige instrumenten


1. Draai de bevestigingsmoer (3) linksom totdat deze van de schroefdraad van de binnenste stang (1) kan worden verwijderd.



2. Trek de buitenste huls (2) van de binnenste stang (1) in de richting van de schroefdraad.



3. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

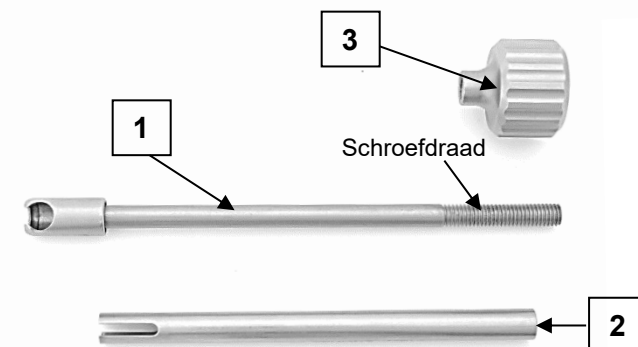

3a) Montage van tweedelige instrumenten

1. Schuif de buitenste huls (2) over de binnenste stang (1).



2. Plaats de bevestigingsmoer (3) op de schroefdraad van de binnenste stang (1) en draai rechtsom vast.



3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.



3b) Montage van driedelige instrumenten

1. Schuif de buitenste huls (2) over de schroefdraad op de binnenste stang (1).



Zorg ervoor dat de dwarsbalk, die zich in de zitting voor de kogeladapter van de binnenste stang (1) bevindt, in de twee sleuven van de buitenste huls (2) glijdt.

2. Plaats de bevestigingsmoer (3) op de schroefdraad van de binnenste stang (1) en draai rechtsom vast.



3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.



Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 CE-markering
---	---	---