

FEHLING ÉCARTEUR SOMOHA

MTJ-1, MTJ-2, MTJ-3

1) Composants / base de la déclaration

À titre d'exemple : MTJ-3

État monté



État démonté



- 1 Patte de guidage
- 2 Ouverture d'introduction
- 3 Rainure de guidage

2) Démontage





Le démontage de l'écarteur nécessite un certain effort en raison de la nature du matériau.

1. Prendre l'écarteur dans les deux mains pour le démontage et pousser les pattes de guidage (1) en direction de l'ouverture d'introduction (2).



Il faut veiller à appliquer une pression égale des deux côtés afin que les pattes de guidage (1) ne se coincent pas.

- Détacher les pattes de guidage (1) de la rainure de guidage (3) par l'ouverture d'introduction (2).
L'écarteur peut ensuite être déroulé.

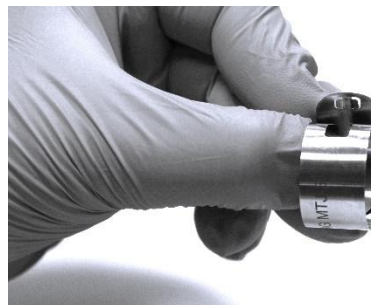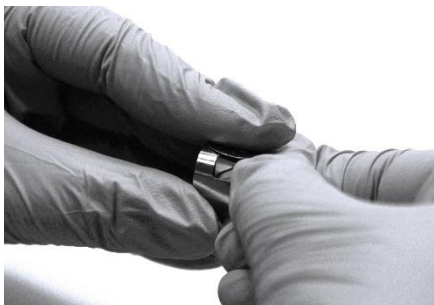


3) Montage




Le montage de l'écarteur nécessite un certain effort en raison de la nature de l'écarteur.

- Pour le montage, amener les deux extrémités de l'écarteur l'une sur l'autre.
Pour cela, l'extrémité avec les pattes de guidage (1) doit être glissée au-dessus de l'extrémité avec la rainure de guidage (3).

Extrémité avec une rainure de guidage

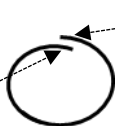

Extrémité avec des pattes de guidage

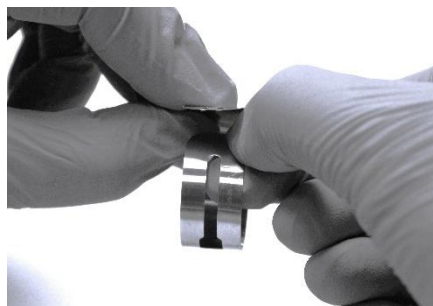

- Amener les pattes de guidage (1) au-dessus de l'ouverture d'introduction (2) et insérer les pattes de guidage (1).
Ensuite, relâcher un peu la pression et laisser les pattes de guidage (1) glisser le long de la rainure de guidage (3).



Si une pression suffisante n'est pas appliquée, il est possible que l'écarteur « saute » en arrière dans le moule démonté.

- L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.



Après le montage, il faut vérifier que les deux pattes de guidage (1) sont bien enclenchées dans l'ouverture d'introduction (2).

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Contactez le fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	---	---