

FEHLING SOMOHA-SPREIDER

MTJ-1, MTJ-2, MTJ-3

1) Bestanddelen / verklarende basis

Als voorbeeld: MTJ-3

Gemonteerde toestand



Gedemonteerde toestand




- 1 Geleidelipjes
- 2 Inbengopening
- 3 Geleidestang

2) Demontage




Het demonteren van de spreider vereist een bepaalde hoeveelheid kracht wegens de aard van het materiaal.

1. Om de spreider te verwijderen, neem deze met beide handen vast en duw de geleidelipjes (1) naar de insteekopening (2).

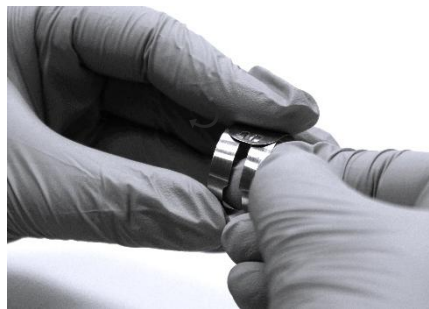

Zorg ervoor dat aan beide zijden gelijkmatig druk wordt uitgeoefend, zodat de geleidelipjes (1) niet kantelen.

2. Maak de geleidelipjes (1) via de insteekopening (2) van de geleidestang (3) los.
De spreider kan dan worden uitgerold.

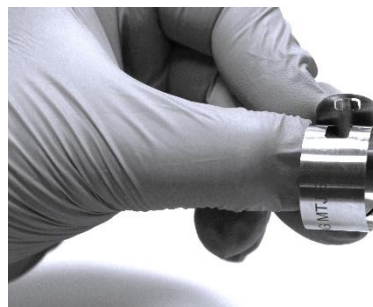


3) Montage




Het monteren van de spreider vereist een bepaalde hoeveelheid kracht wegens de aard van de spreider.

1. Breng voor de montage beide uiteinden van de spreider op elkaar.
Het uiteinde met de geleidelipjes (1) moet over het uiteinde met de geleidestang (3) worden geschoven.

Uiteinde met geleidestang

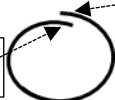

Uiteinde met geleidelipjes

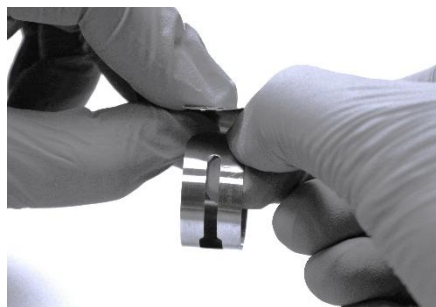

2. Plaats de geleideslipjes (1) over de insteekopening (2) en steek de geleideslipjes (1) erin.
Los vervolgens de druk een beetje en laat de geleidelipjes (1) langs de geleidestang (3) glijden.



Als er niet genoeg druk wordt uitgeoefend, kan de spreider terug in de gedemonteerde vorm "springen".

3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.



Controleer na de montage of beide geleidelipjes (1) in de insteekopening (2) zitten.

Symbolen		
Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	
Neem contact op met de fabrikant		 CE-markering
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	