

SEPARADOR SOMOHA FEHLING

MTJ-1, MTJ-2, MTJ-3

1) Componentes / Base explicativa

Ejemplar: MTJ-3

Estado de montaje



Estado desmontado



- 1 Lengüetas guía
- 2 Abertura de inserción
- 3 Barra guía

2) Desmontaje





Desmontar el separador requiere una cierta cantidad de fuerza debido a la naturaleza del material.

1. Para extraer el separador, tómelo con ambas manos y empuje las lengüetas de guía (1) hacia la abertura de inserción (2).



Asegúrese de que la presión se aplica uniformemente desde ambos lados para que las lengüetas guía (1) no se inclinen.

2. Suelte las lengüetas guía (1) de la barra guía (3) a través de la abertura de inserción (2). A continuación, puede desplegarse el separador.

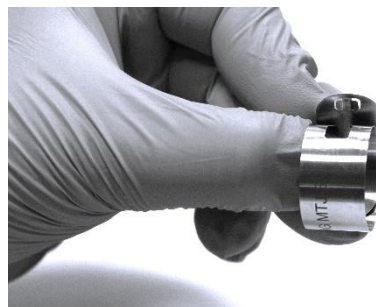
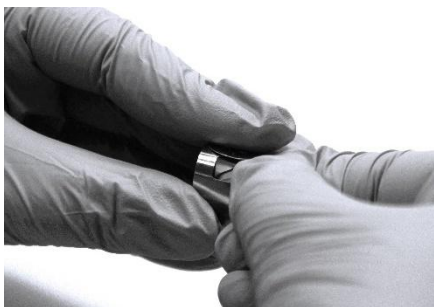


3) Montaje



Debido a la naturaleza del separador, se requiere una cierta cantidad de fuerza para ajustarlo.

1. Para el montaje, ponga ambos extremos del separador uno encima del otro. El extremo con las lengüetas guía (1) debe empujarse sobre el extremo con la barra guía (3).

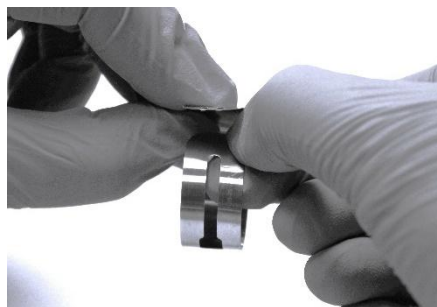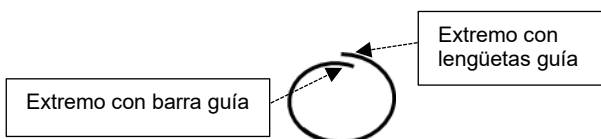

2. Coloque las lengüetas guía (1) sobre la abertura de inserción (2) e inserte las lengüetas guía (1). A continuación, afloje ligeramente la presión y deje que las lengüetas guía (1) se deslicen a lo largo de la barra guía (3).



Si no se aplica suficiente presión, el separador puede "saltar" de nuevo a la forma desmontada.

3. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.



Tras la instalación, se tiene que comprobar que ambas lengüetas guía (1) encajan en la abertura de inserción (2).

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	--	---