


FEHLING BALKSPREIDER MET TANDWIEL / VERGRENDELING

Geldig voor alle balkspreiders met tandwiel (vergrendeling)

1) Bestanddelen / verklarende basis



Als voorbeeld: MRP-1

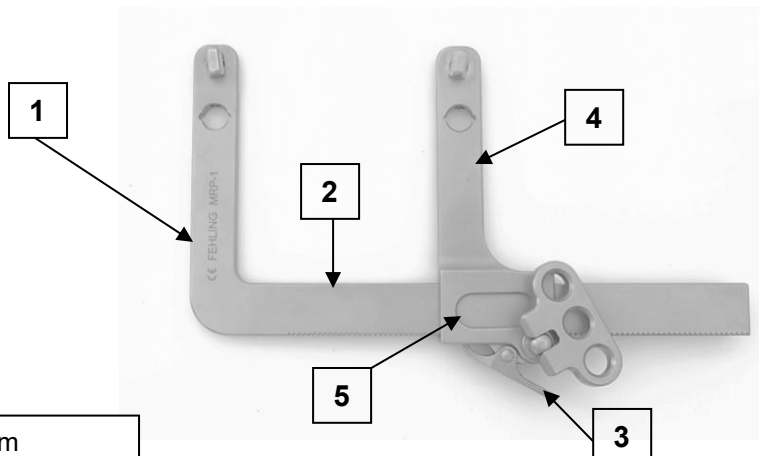

- 1 Vaste spreiderarm
- 2 Tandheugel
- 3 Vergrendeling
- 4 Beweegbare spreiderarm
- 5 Behuizing


2) Demontage

1. Beweeg de beweegbare spreiderarm (4) naar buiten op de tandheugel (2) totdat deze kan worden verwijderd. Los ondertussen de vergrendeling (3) door in de richting van de tandheugel (2) te duwen.
2. Het uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

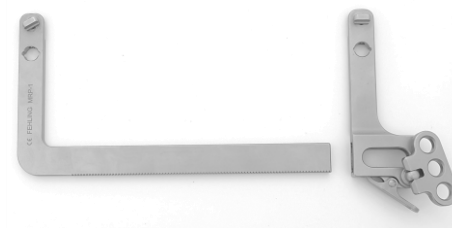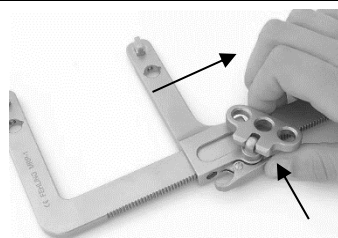


3) Montage

1. Plaats de tandheugel (2) in de uitsparing in de behuizing (5). Los ondertussen de vergrendeling (3) door in de richting van de tandheugel (2) te duwen.

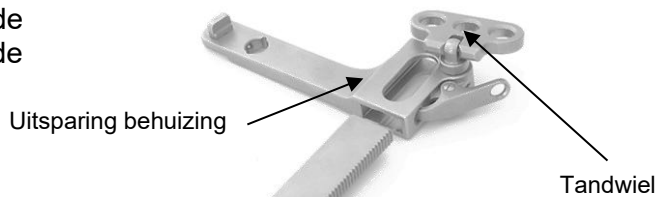


Zorg ervoor dat beide spreiderarmen in dezelfde richting wijzen en dat het tandwiel van de beweegbare spreiderarm (4) naar buiten wijst.

2. Beweeg de beweegbare spreiderarm (4) op de tandheugel (2) naar binnen in de richting van de vaste spreiderarm (1).

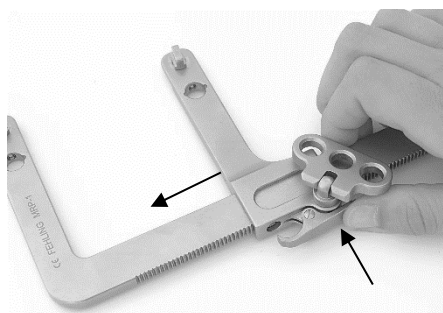

3. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

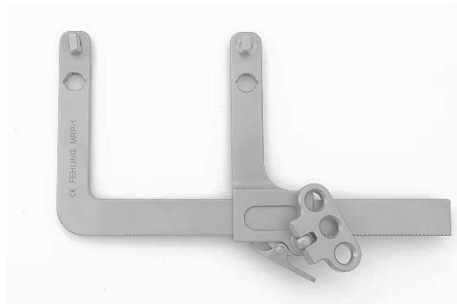

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 CE-markering
---	---	---