


FEHLING APART STANZEN

1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

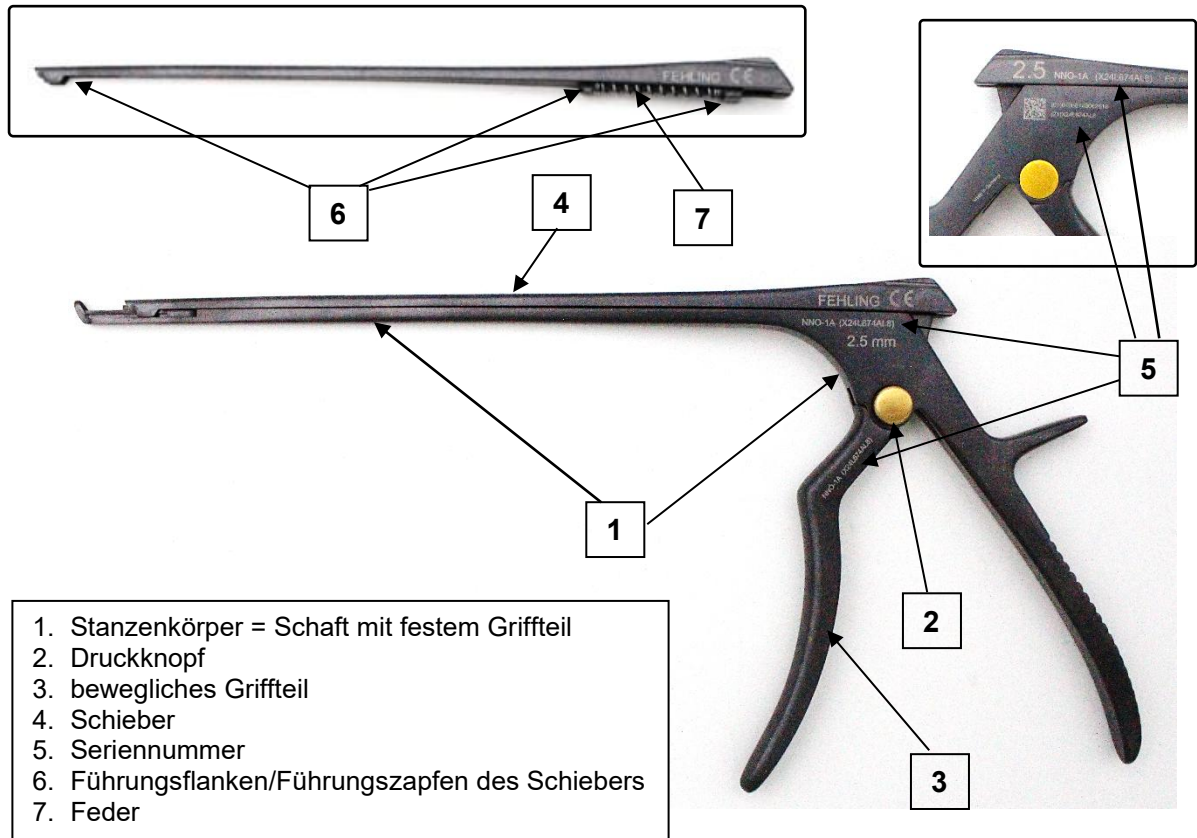

2) Demontage


1. Stanze wie abgebildet in beide Hände nehmen.
2. Mit dem Daumen der rechten Hand den Druckknopf (2) drücken und gleichzeitig den Zeigefinger der rechten Hand auf den Schieber (4) legen (damit der Schieber (4) nicht unkontrolliert herausfallen kann).



- Wenn der Druckknopf (2) sich nicht mehr weiter durchdrücken lässt, die Position halten und gleichzeitig mit der linken Hand das bewegliche Griffteil (3) nach schräg unten ziehen.



Das bewegliche Griffteil (3) kann nicht vollständig herausgezogen werden, da dieses durch den Druckknopf (2) mit dem Stanzenkörper (1) verbunden ist.

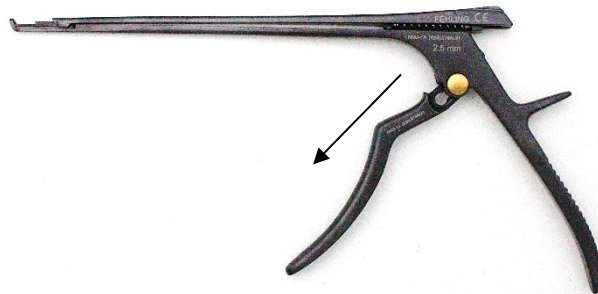

- Der Schieber (4) springt nun aus seiner Halterung und lässt sich leicht abnehmen
- Die beiden Einzelteile immer zusammen in demselben Behälter aufbereiten.



Der Stanzenkörper (1), das bewegliche Griffteil (3) sowie der Schieber (4) tragen eine identische Seriennummer zur Kontrolle (5), beispielsweise X19E214WM. Zusammengebaut werden dürfen nur Instrumententeile mit gleicher Seriennummer (5).

3) Montage

- Den Schieber (4) mit der Feder (7) auf den Schaft (1) setzen. Dabei die Führungsflanken/Führungszapfen (6) des Schiebers (4) in die entsprechenden Aufnahmen im Schaft (1) einfügen.



Die Führungsflanken/Führungszapfen (6) des Schiebers (4) müssen sich in die entsprechenden Aufnahmen im Schaft des Stanzenkörpers (1) einfügen.

- Den Schieber (4) langsam Richtung Stanzenfuß drücken, bis das Ende des Schiebers (4) etwa 5 mm über das Schaftende hinaus in Richtung Stanzenfuß geschoben ist.



3. Bei unveränderter Position von Schieber (4) und Schaft (1) das bewegliche Griffteil (3) in den Stanzenkörper (1) schieben, bis dieser hörbar einrastet.



4. Das bewegliche Griffteil (3) ist nur richtig eingerastet, wenn der Druckknopf (2) wie abgebildet komplett heraussteht. Sollte die Position des Druckknopfs wie in der Abbildung „FALSCH“ aussehen, muss der Zusammenbau erneut vorgenommen werden. Hierzu zunächst das Instrument gemäß Abschnitt 2) *Demontage* demontieren, anschließend gemäß Abschnitt 3) *Montage* wieder zusammenbauen und erneut die Position des Druckknopfs prüfen.



RICHTIG

FALSCH

	Die Stanze darf nur eingesetzt werden, wenn das bewegliche Griffteil (3) richtig verriegelt ist!
	Während des Einsatzes darf niemals der goldene Verriegelungsknopf niedergedrückt werden. Die Stanze könnte sich dadurch ganz oder teilweise zerlegen.
	Vor allem bei großem Krafteinsatz darauf achten, dass der Daumen oder ein anderer Handteil nicht auf den Verriegelungsknopf drückt. Durch den Druck könnte der Entriegelungsmechanismus ausgelöst werden.
	Sollte die Stanze haken oder nicht stabil in der Führung laufen, umgehend prüfen, ob sie richtig montiert ist. Eine korrekt montierte Stanze ist daran zu erkennen, dass der goldene Verriegelungsknopf auf der beschrifteten Stanzenseite vollständig heraussteht.
	Sollte das nicht der Fall sein, muss die Stanze vor dem weiteren Benutzen dem OP-Personal zur korrekten Montage übergeben werden

5. Nach einem Funktionstest kann die Stanze wieder eingesetzt werden



Symbole		
Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:		
 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Katalognummer	 Chargenbezeichnung	 Seriennummer
 Medizinprodukt	 eindeutige Produktidentifizierung	 0297 CE-Kennzeichnung
 Ölkännchen für zu schmierende Stellen	 CE-Kennzeichnung	
Kontakt zum Hersteller		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	