


SZCZYPCE FEHLING CONCEPT APART

1) Części składowe / podstawa wyjaśnienia

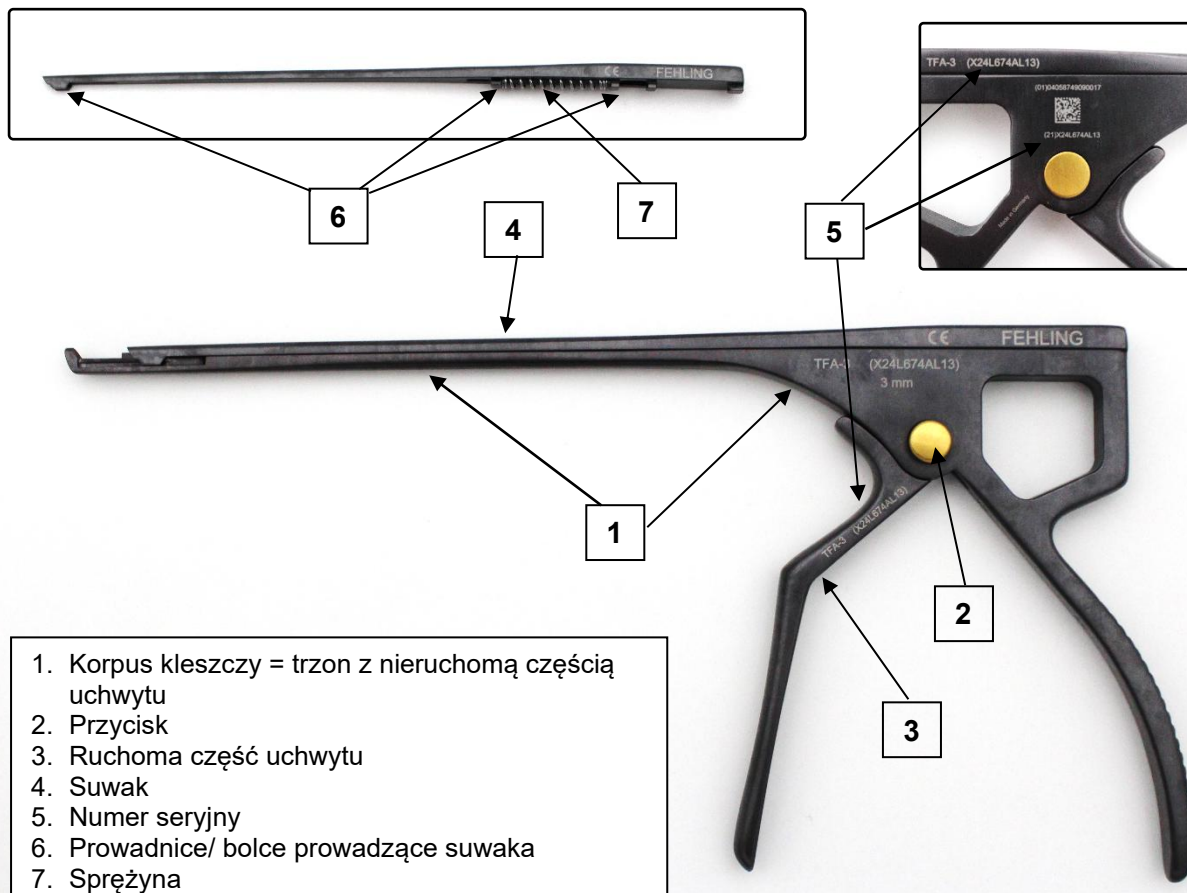

1. Korpus kleszczy = trzon z nieruchomą częścią uchwytu
2. Przycisk
3. Ruchoma część uchwytu
4. Suwak
5. Numer seryjny
6. Prowadnice/ bolce prowadzące suwaka
7. Sprężyna

2) Demontaż

1. Chwycić kleszcze obiema rękami, jak pokazano na rysunku.
2. Kciukiem prawej ręki nacisnąć przycisk (2), jednocześnie kładąc palec wskazujący prawej ręki na suwaku (4) (tak aby suwak (4) nie mógł wypaść w niekontrolowany sposób).



3. W momencie, gdy nie można wcisnąć przycisku (2) bardziej, przytrzymać kleszcze w tej pozycji i jednocześnie lewą ręką pociągnąć ruchomą część uchwyty (3) ukośnie w dół.



Ruchomej części uchwyty (3) nie można całkowicie wyciągnąć, gdyż jest ona połączona z korpusem kleszczy (1) za pomocą przycisku (2).

4. W tym momencie suwak (4) wyskoczy ze swojego mocowania i można go łatwo wyjąć.

5. Obydwa elementy poddawać regeneracji zawsze razem, w tym samym pojemniku.



Korpus kleszczy (1), ruchoma część uchwyty (3) oraz suwak (4) są oznaczone identycznym numerem seryjnym do kontroli (5), przykładowo X24L674AL13. Składać można wyłącznie części instrumentu o tym samym numerze seryjnym (5).

3) Montaż

1. Założyć suwak (4) wraz ze sprężyną (7) na trzon (1). Prowadnice/ bolce prowadzące (6) suwaka (4) wsunąć do szyny prowadzącej trzonu (1).




Prowadnice/ bolce prowadzące (6) suwaka (4) muszą wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie korpusu kleszczy (1).


2. Powoli wciskać suwak (4) w kierunku stopy kleszczy do momentu, aż koniec suwaka (4) będzie przesunięty o około 5 mm poza koniec trzonu w kierunku stopy kleszczy.



3. Nie zmieniając pozycji suwaka (4) i trzonu (1), przesunąć ruchomą część uchwyty (3) w kierunku korpusu kleszczy (1) do momentu słyszalnego zatrzaśnięcia.

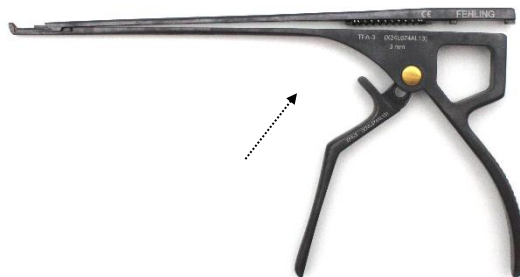

4. Ruchoma część uchwyty (3) jest zazębiona prawidłowo tylko wtedy, gdy przycisk (2) wystaje całkowicie, jak pokazano na rysunku. Jeśli przycisk znajduje się w pozycji przedstawionej na rysunku jako „NIEPRAWIDŁOWA”, to montaż należy powtórzyć. W tym celu najpierw należy zdemonstrować instrument zgodnie z punktem 2) *Demontaż*, a następnie złożyć go zgodnie z punktem 3) *Montaż* i skontrolować ponownie pozycję przycisku.

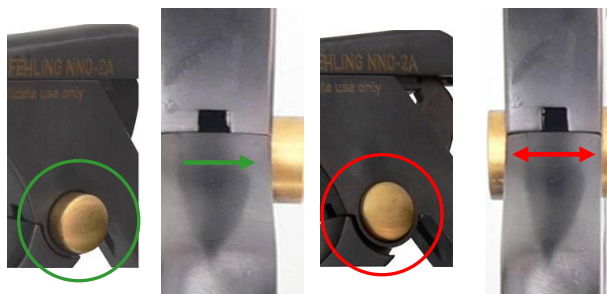

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO



Kleszczy można używać wyłącznie pod warunkiem prawidłowego zablokowania ruchomej części uchwyty (3)!

5. Po wykonaniu testu działania kleszczy można używać ponownie.



Symbole		
O ile symbole takie znajdują się na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub w instrukcji używania, to mają one następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznać się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	