


PUNZÓN FEHLING APART

1) Componentes / base explicativa

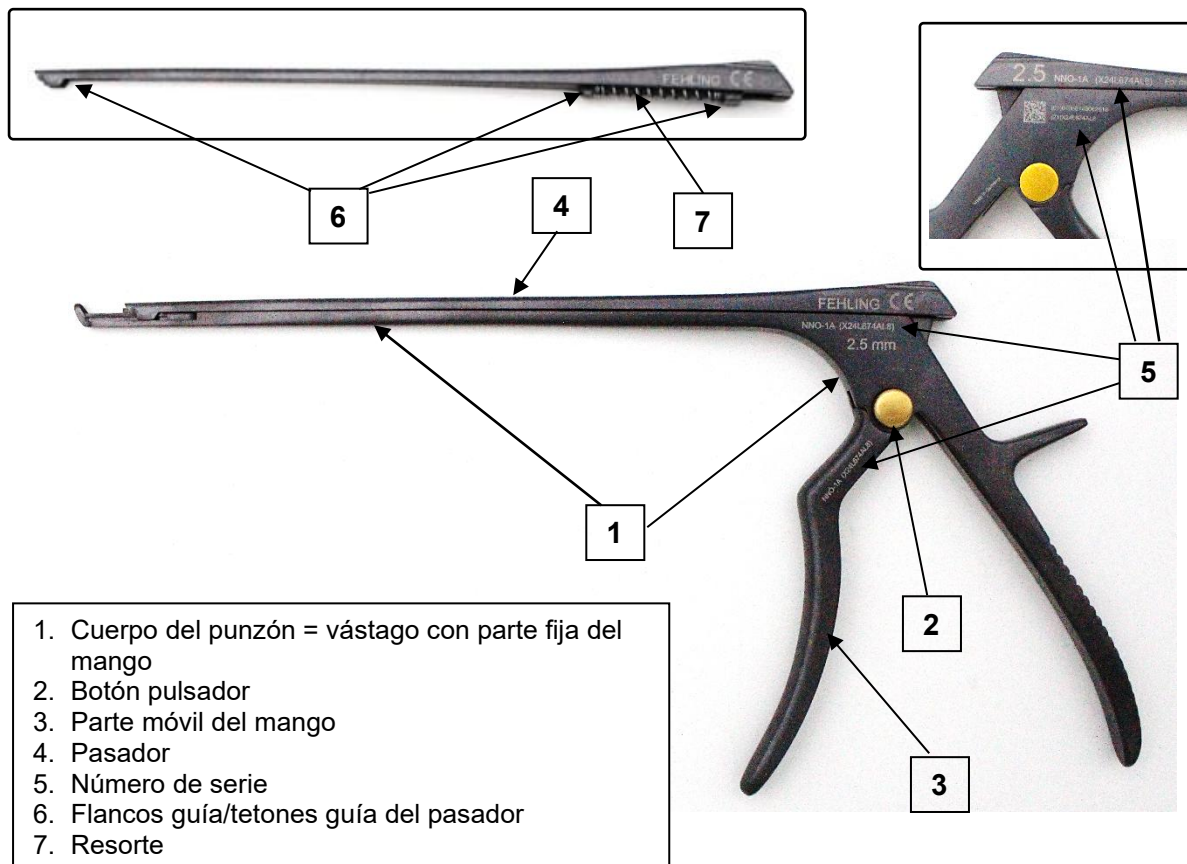

2) Desmontaje


1. Sujete el punzón con ambas manos como se indica.
2. Pulse el botón pulsador (2) con el pulgar de la mano derecha y, al mismo tiempo, coloque el dedo índice de la mano derecha sobre el pasador (4) (para evitar que el pasador (4) se caiga de forma incontrolada).



3. Cuando el botón pulsador (2) ya no pueda presionarse más, mantenga la posición y, al mismo tiempo, tire de la parte móvil del mango (3) hacia abajo en diagonal con la mano izquierda.



La parte móvil del mango (3) no se puede extraer por completo, ya que está unida al cuerpo del punzón (1) mediante el botón pulsador (2).

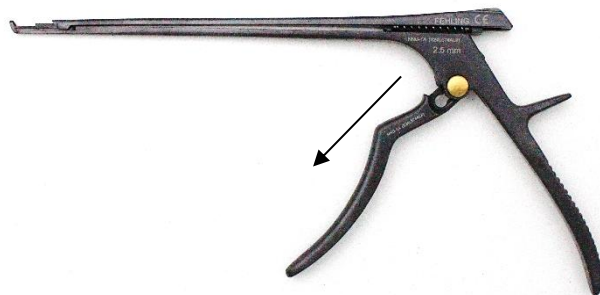


4. El pasador (4) salta ahora de su soporte y puede retirarse con facilidad.
5. Reprocese siempre las dos piezas individuales juntas en el mismo recipiente.



El cuerpo del punzón (1), la parte móvil del mango (3) y el pasador (4) llevan un número de serie idéntico para su control (5), por ejemplo, X19E214WM. Solo pueden montarse juntos los componentes del instrumento con el mismo número de serie (5).


3) Montaje

1. Coloque el pasador (4) con el resorte (7) sobre el vástago (1). Para ello, encajar los flancos guía/tetones guía (6) del pasador (4) en los alojamientos correspondientes del vástago (1).

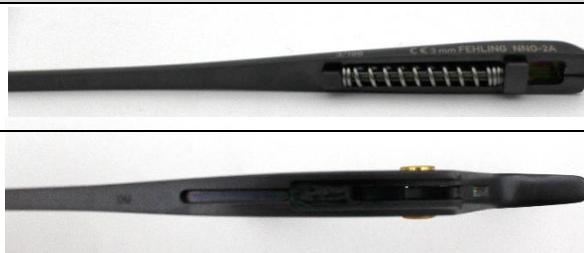

Los flancos guía/tetones guía (6) del pasador (4) deberán encajar en los alojamientos correspondientes del vástago del cuerpo del punzón (1).

2. Presione lentamente el pasador (4) hacia el pie del punzón hasta que el extremo del pasador (4) sobresalga unos 5 mm del extremo del vástago en dirección al pie del punzón.

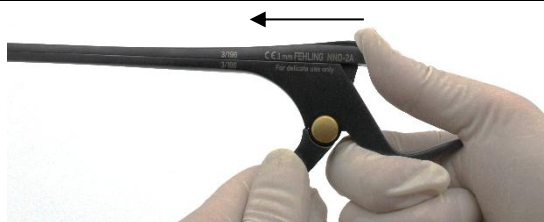

3. Sin cambiar la posición del pasador (4) y del vástago (1), deslice la parte móvil del mango (3) en el cuerpo del punzón (1) hasta que encaje y se oiga un clic.



4. La parte móvil del mango (3) solo está correctamente encajada si el botón pulsador (2) sobresale por completo como se indica. Si la posición del botón pulsador coincide con la ilustración «INCORRECTO», repita el montaje. Para ello, desmonte primero el instrumento conforme al apartado 2) *Desmontaje* y, a continuación, vuelva a montarlo conforme al apartado 3) *Montaje* y compruebe de nuevo la posición del botón pulsador.



CORRECTO

INCORRECTO

	¡Utilice el punzón solo si la parte móvil del mango (3) está correctamente bloqueada!
	No pulsar nunca el botón de bloqueo dorado durante el uso. Esto podría provocar el desmontaje total o parcial del punzón.
	Preste especial atención a que el pulgar o cualquier otra parte de la mano no presione el botón de bloqueo, sobre todo al aplicar una gran fuerza. La presión podría activar el mecanismo de desbloqueo.
	Si el punzón se atasca o no se desliza de forma estable en la guía, compruebe inmediatamente si está correctamente montado. Se puede reconocer que el punzón está correctamente montado cuando el botón de bloqueo dorado en el lado marcado del punzón sobresale completamente.
	Si no es así, deberá entregarse el punzón al personal quirúrgico para su correcto montaje antes de continuar con su uso.
5. El punzón puede volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento. 	

Símbolos		
En la medida en que figuren en el producto sanitario, en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, los símbolos tienen el siguiente significado conforme a la norma DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 0297 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	
Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 Correo electrónico: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	