


PINCES APART FEHLING

1) Composants / Principes d'explication

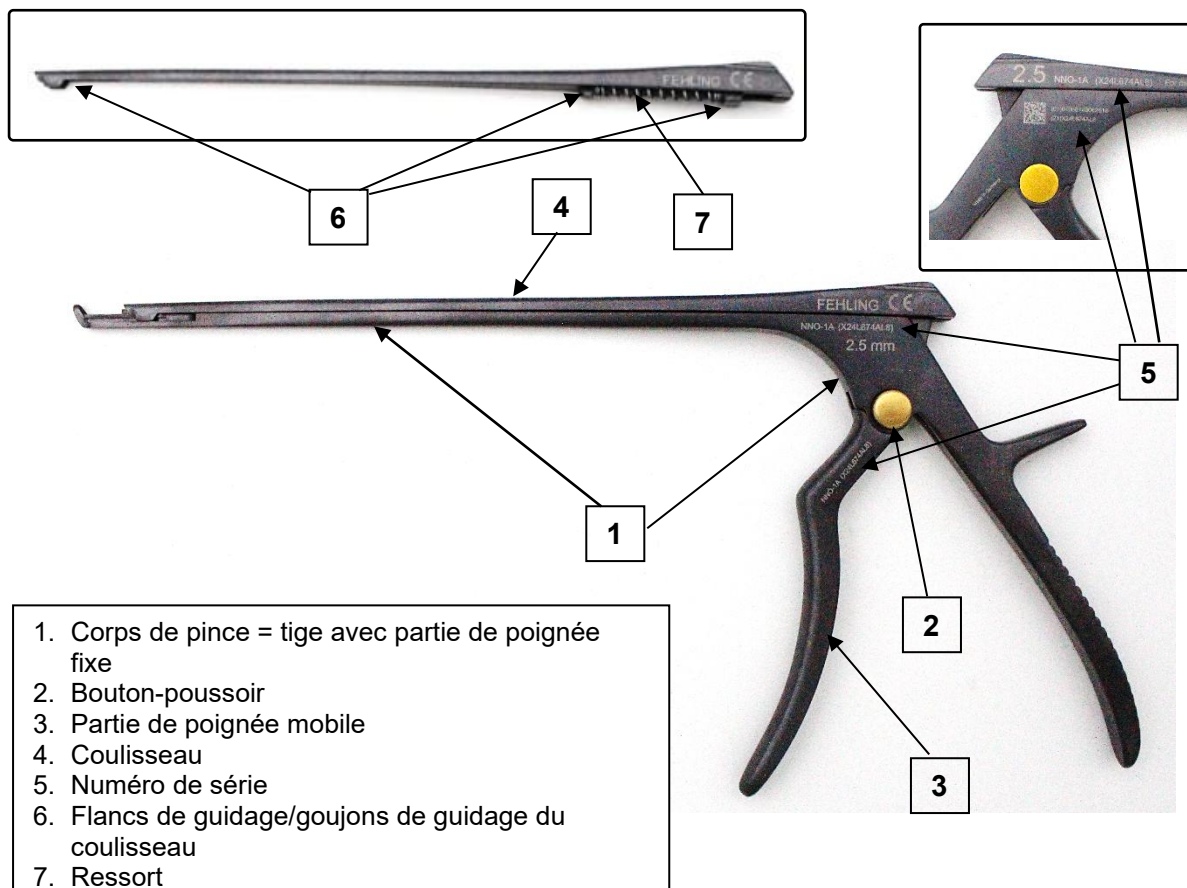

2) Démontage

1. Prendre la pince à deux mains comme illustré.



2. Appuyer sur le bouton-poussoir (2) avec le pouce de la main droite et placer simultanément l'index de la main droite sur le coulisseau (4) (pour éviter que le coulisseau (4) ne tombe de manière incontrôlée).



- Lorsque le bouton-poussoir (2) ne peut plus être enfoncé, maintenir la position et tirer simultanément la partie de poignée mobile (3) vers le bas en biais avec la main gauche.



La partie de poignée mobile (3) ne peut pas être complètement retirée, car elle est reliée au corps de pince (1) par le bouton-poussoir (2).

- Le coulisseau (4) sort alors de son logement et peut être facilement retiré
- Toujours retraire les deux pièces individuelles ensemble dans le même récipient.



Le corps de pince (1), la partie de poignée mobile (3) ainsi que le coulisseau (4) portent un numéro de série identique à des fins de contrôle (5), par exemple X19E214WM. Seules les pièces d'instrument portant le même numéro de série (5) peuvent être assemblées.


3) Montage

- Placer le coulisseau (4) avec le ressort (7) sur la tige (1). Pour ce faire, insérer les flancs de guidage/goujons de guidage (6) du coulisseau (4) dans les logements correspondants de la tige (1).



Les flancs de guidage/goujons de guidage (6) du coulisseau (4) doivent s'insérer dans les logements correspondants de la tige du corps de la pince (1).

- Appuyer lentement sur le coulisseau (4) en direction du pied de la pince jusqu'à ce que l'extrémité du coulisseau (4) dépasse d'environ 5 mm l'extrémité de la tige en direction du pied de la pince.

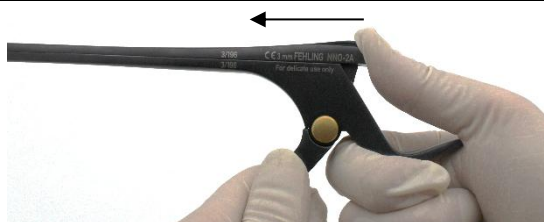

3. Sans modifier la position du coulisseau (4) et de la tige (1), faire glisser la partie de poignée mobile (3) dans le corps de la pince (1) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.



4. La partie de poignée mobile (3) n'est correctement enclenchée que si le bouton-poussoir (2) ressort complètement comme illustré. Si la position du bouton-poussoir ressemble à l'illustration « INCORRECT », le montage doit être répété. Pour ce faire, démonter d'abord l'instrument conformément à la section 2) *Démontage*, puis le remonter conformément à la section 3) *Montage* et vérifier à nouveau la position du bouton-poussoir.



CORRECT

INCORRECT

	La pince ne doit être utilisée que si la partie de poignée mobile (3) est correctement verrouillée !
	Le bouton de verrouillage doré ne doit jamais être enfoncé pendant l'utilisation. La pince pourrait alors se démonter totalement ou partiellement.
	Veiller à ce que le pouce ou une autre partie de la main n'appuie pas sur le bouton de verrouillage surtout lors de l'application d'efforts importants. La pression pourrait déclencher le mécanisme de déverrouillage !
	Si la pince coince ou ne coulisse pas de manière stable dans le guide, vérifier immédiatement si elle est correctement montée. On reconnaît qu'une pince est correctement montée quand le bouton de verrouillage doré dépasse entièrement du côté de la pince portant le marquage.
	Si ce n'est pas le cas, il faut remettre la pince au personnel du bloc opératoire pour qu'il réalise un montage correct avant toute autre utilisation
5. Après un test de fonctionnement, la pince peut être réutilisée 	

Symboles		
Dans la mesure où ils figurent sur le dispositif médical, son étiquette ou encore la notice, les symboles ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :		
 Fabricant	 Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation électroniques	 Attention
 Numéro catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	
Coordonnées du fabricant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Allemagne Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-mail : info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	