

FEHLING APART-STANSEN

1) Onderdelen / Verklarende basis



2) Demontage

1. Neem de stans zoals afgebeeld in beide handen.
2. Druk met de duim van de rechterhand op de drukknop (2) en leg tegelijkertijd de wijsvinger van de rechterhand op de schuif (4) (zodat de schuif (4) er niet ongecontroleerd uit kan vallen).




- Houd, wanneer de drukknop (2) niet verder kan worden ingedrukt, de positie vast en trek tegelijkertijd met de linkerhand het beweegbare handgreepdeel (3) schuin naar beneden.



Het beweegbare handgreepdeel (3) kan niet volledig worden uitgetrokken, omdat dit door de drukknop (2) met de stansbehuizing (1) is verbonden.

- De schuif (4) springt nu uit zijn houder en kan eenvoudig worden verwijderd.
- Herverwerk de twee afzonderlijke delen altijd samen in dezelfde container.

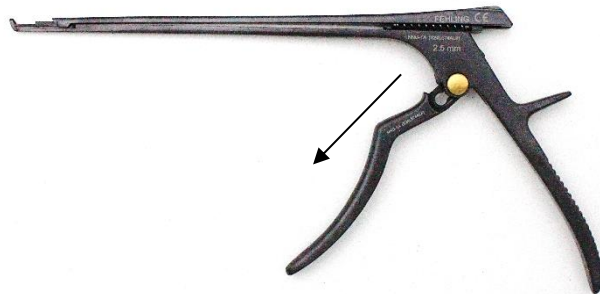

Op de stansbehuizing (1), het beweegbare handgreepdeel (3) en de schuif (4) staat ter controle een identiek serienummer (5), bijvoorbeeld X19E214WM. Alleen instrumentonderdelen met hetzelfde serienummer (5) mogen samen worden gemonteerd.

3) Montage

- Plaats de schuif (4) met de veer (7) op de schacht (1). Plaats hierbij de geleidingsvlakken/-pennen (6) van de schuif (4) in de overeenkomstige bevestigingen in de schacht (1).



De geleidingsvlakken/-pennen (6) van de schuif (4) moeten in de overeenkomstige bevestigingen in de schacht van de stansbehuizing (1) worden geplaatst.

- Druk de schuif (4) langzaam in de richting van de stansvoet totdat het uiteinde van de schuif (4) ongeveer 5 mm voorbij het uiteinde van de schacht in de richting van de stansvoet is geschoven.



3. Schuif bij ongewijzigde positie van de schuif (4) en de schacht (1) het beweegbare handgreepdeel (3) in de stansbehuizing (1) totdat deze hoorbaar vastklikt.



4. Het beweegbare handgreepdeel (3) is alleen correct vergrendeld als de drukknop (2) volledig uitsteekt zoals afgebeeld. Als de positie van de drukknop eruitziet zoals in de afbeelding 'NIET CORRECT', moet de montage opnieuw worden uitgevoerd. Demonteer hiervoor eerst het instrument volgens paragraaf 2) *Demontage*, monteer het vervolgens opnieuw volgens paragraaf 3) *Montage* en controleer opnieuw de positie van de drukknop.



CORRECT

NIET CORRECT

	De stans mag alleen worden gebruikt als het beweegbare handgreepdeel (3) correct is vergrendeld!
	Tijdens het gebruik mag de gouden vergrendelingsknop nooit worden ingedrukt. Hierdoor kan de stans geheel of gedeeltelijk uit elkaar vallen.
	Met name bij het gebruik van veel kracht dient u ervoor te zorgen dat uw duim of een ander deel van uw hand niet op de vergrendelingsknop drukt. De druk kan het ontgrendelmechanisme activeren!
	Indien de stans zich vasthaakt of niet stabiel door de geleiding loopt, dient u onmiddellijk te controleren of deze correct gemonteerd is. Een correct gemonteerde stans is te herkennen aan het volledig uitsteken van de gouden vergrendelingsknop aan de gelabelde zijde van de stans.
	Wanneer dit niet het geval is, dient de stans vóór verder gebruik aan het OK-personeel te worden overhandigd voor correcte montage.
5. Na een functionele test kan de stans opnieuw worden gebruikt. 	

Symbolen

Voor zover afgebeeld op het medische hulpmiddel, het etiket van het medische hulpmiddel of in de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen overeenkomstig DIN EN ISO 15223-1 de volgende betekenis:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekannetje voor te smeren punten	 CE-markering	

Contact met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Duitsland Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---