


KLESZCZE FEHLING APART

1) Części składowe / podstawa wyjaśnienia

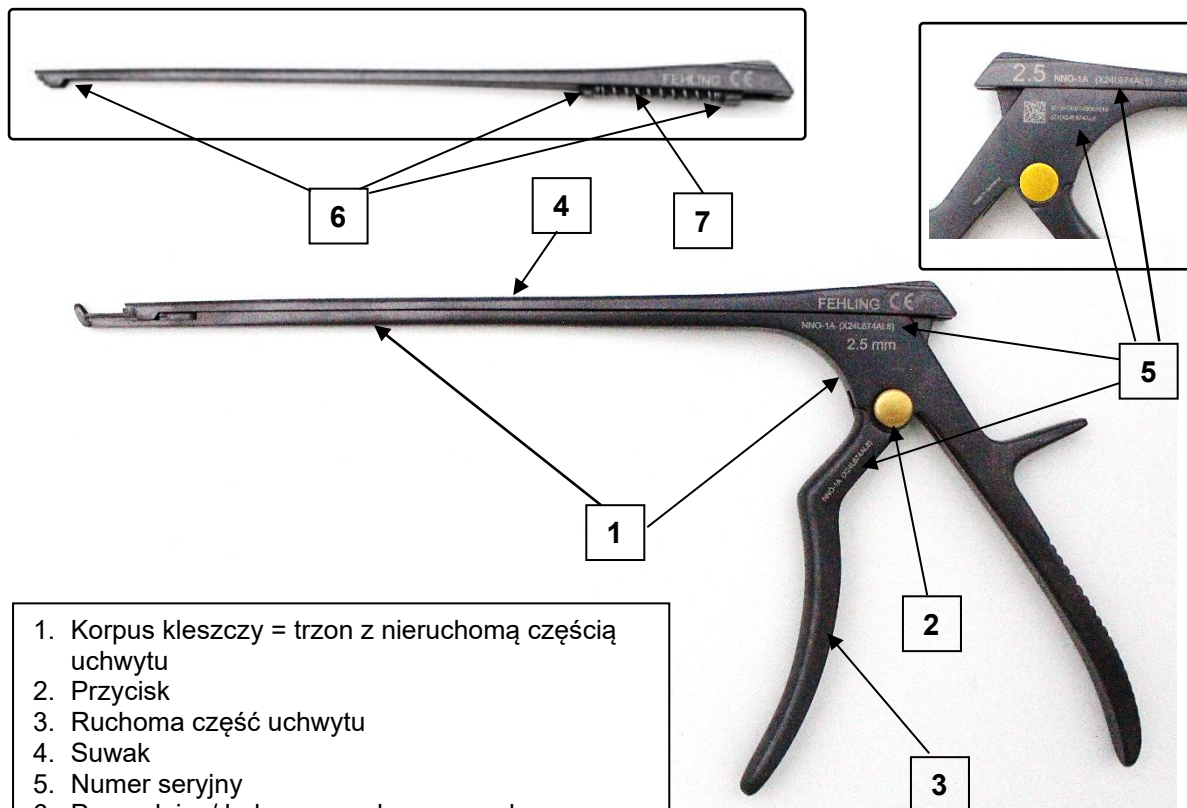

1. Korpus kleszczy = trzon z nieruchomą częścią uchwytu
2. Przycisk
3. Ruchoma część uchwytu
4. Suwak
5. Numer seryjny
6. Prowadnice/ bolce prowadzące suwaka
7. Sprężyna

2) Demontaż

1. Chwycić kleszcze obiema rękami, jak pokazano na rysunku.



2. Kciukiem prawej ręki nacisnąć przycisk (2), jednocześnie kładąc palec wskazujący prawej ręki na suwaku (4) (tak aby suwak (4) nie mógł wypaść w niekontrolowany sposób).




3. W momencie, gdy nie można wcisnąć przycisku (2) bardziej, przytrzymać kleszcze w tej pozycji i jednocześnie lewą ręką pociągnąć ruchomą część uchwytu (3) ukośnie w dół.



Ruchomej części uchwytu (3) nie można całkowicie wyciągnąć, gdyż jest ona połączona z korpusem kleszczy (1) za pomocą przycisku (2).

4. W tym momencie suwak (4) wyskoczy z mocowania i można go łatwo zdjąć.

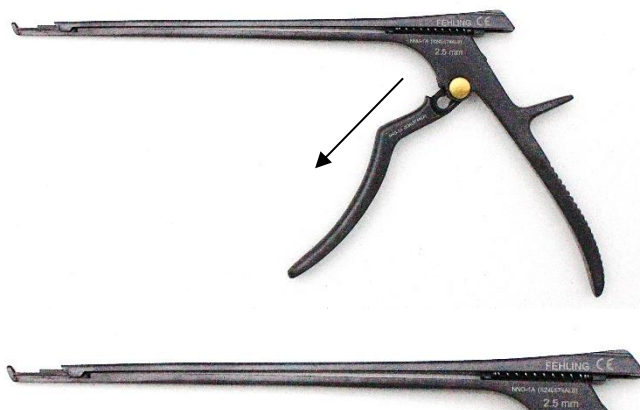

5. Obydwa elementy poddawać regeneracji zawsze razem, w tym samym pojemniku.



Korpus kleszczy (1), ruchoma część uchwytu (3) oraz suwak (4) są oznaczone identycznym numerem seryjnym do kontroli (5), przykładowo X19E214WM. Składać można wyłącznie części instrumentu o tym samym numerze seryjnym (5).

3) Montaż

1. Założyć suwak (4) wraz ze sprężyną (7) na trzon (1). Przy czym prowadnice/ bolce prowadzące (6) suwaka (4) należy wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie (1).



Prowadnice/ bolce prowadzące (6) suwaka (4) muszą wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie korpusu kleszczy (1).


2. Powoli wciskać suwak (4) w kierunku stopy kleszczy do momentu, aż koniec suwaka (4) będzie przesunięty o około 5 mm poza koniec trzonu w kierunku stopy kleszczy.



3. Nie zmieniając pozycji suwaka (4) i trzonu (1) przesunąć ruchomą część uchwytu (3) w kierunku korpusu kleszczy (1) do momentu słyszalnego zatrzaśnięcia.



4. Ruchoma część uchwyty (3) jest zazębiona prawidłowo tylko wtedy, gdy przycisk (2) wystaje całkowicie, jak pokazano na rysunku. Jeśli przycisk znajduje się w pozycji przedstawionej na rysunku jako „NIEPRAWIDŁOWA”, to montaż należy powtórzyć. W tym celu najpierw należy zdemontować instrument zgodnie z punktem 2) *Demontaż*, a następnie złożyć go zgodnie z punktem 3) *Montaż* i skontrolować ponownie pozycję przycisku.

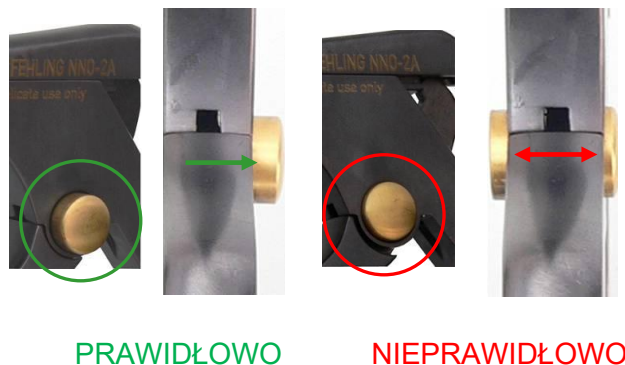

	Kleszczy można używać wyłącznie pod warunkiem prawidłowego zablokowania ruchomej części uchwyty (3)!
	Podczas użytkowania pod żadnym pozorem nie wolno wciskać złotego przycisku blokady. Mogłoby to spowodować całkowity lub częściowy demontaż kleszczy.
	Należy szczególnie uważać, aby podczas stosowania z użyciem dużej siły nie nacisnąć kciukiem, ani inną częścią dłoni na przycisk blokady. Naciśnięcie tego przycisku może uruchomić mechanizm odblokowujący.
	W przypadku zacięcia się lub niestabilnego prowadzenia kleszczy w przewodnicy, niezwłocznie sprawdzić, czy są one prawidłowo zmontowane. Prawidłowo zmontowane kleszcze można rozpoznać po tym, że złoty przycisk blokady całkowicie wystaje po stronie kleszczy z oznaczeniem.
	Jeśli tak nie jest, to przed dalszym użytkowaniem kleszcze należy przekazać personelowi bloku operacyjnego w celu ich prawidłowego zmontowania.

5. Po wykonaniu testu działania kleszczy można używać ponownie.



Symbole		
O ile symbole takie znajdują się na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub w instrukcji używania, to mają one następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznać się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	