


Pinces FEHLING CONCEPT X

1) Composants / Principes d'explication

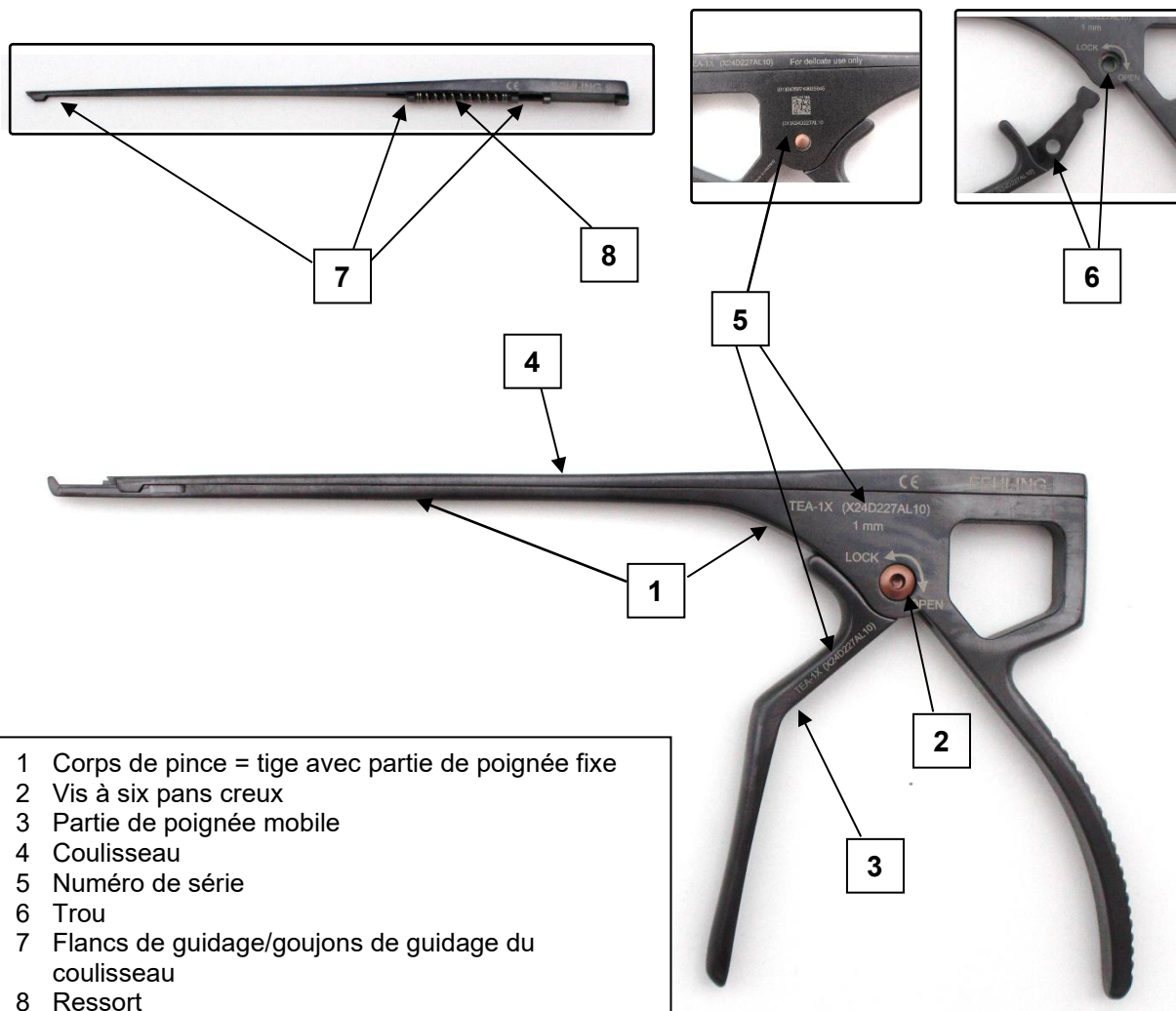

2) Démontage

1. Déposer la pince à démonter sur une surface de travail fixe. Tourner la vis à six pans creux (2) dans le sens horaire à l'aide du tournevis TXX-0X (tournevis stérilisable TXW-9X en alternative) et la retirer du trou de vis.




2. Tirer la partie de poignée mobile (3) vers le bas et la séparer du corps de pince (1). Pour faciliter le déverrouillage, le coulisseau (4) doit être poussé simultanément vers le pied de la pince.



Lors du retrait de la partie de poignée mobile (3), le coulisseau (4) se détache automatiquement.



3. Le coulisseau (4) peut maintenant être facilement retiré du corps de pince (1).

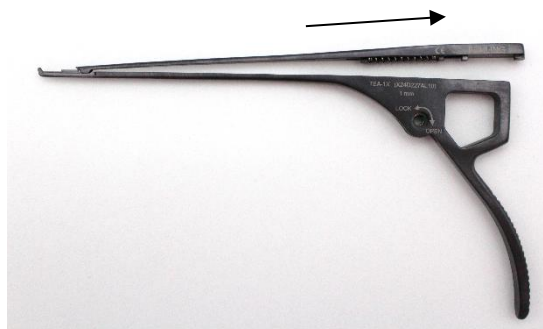

4. Toujours retraire les quatre pièces individuelles ensemble dans le même récipient.



Le corps de pince (1), la partie de poignée mobile (3) ainsi que le coulisseau (4) portent un numéro de série identique pour le contrôle (5), par exemple X24D227AL10. Seules les pièces d'instrument portant le même numéro de série (5) peuvent être assemblées.

3) Montage


1. Placer le coulisseau (4) avec le ressort (8) sur la tige (1). Insérer les flancs de guidage/goujons de guidage (7) du coulisseau (4) dans les logements correspondants de la tige (1).





Les flancs de guidage/goujons de guidage (7) du coulisseau (4) doivent s'insérer dans les logements correspondants de la tige du corps de la pince (1).

2. Pousser lentement le coulisseau (4) vers le pied de la pince jusqu'à ce que l'extrémité du coulisseau dépasse d'environ 5 mm l'extrémité de la tige en direction du pied de la pince.

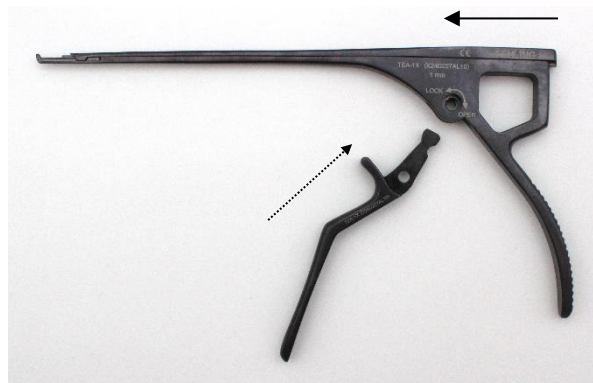

3. Sans modifier la position du coulisseau (4) et de la tige (1), insérer la partie de poignée mobile (3) dans le corps de la pince (1). Veiller à ce que les trous (6) de la partie de poignée mobile (3) et du corps de pince (1) soient précisément alignés.



4. Visser la vis à six pans creux (2) dans le trou taraudé prévu à cet effet dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis TXX-0X (tournevis stérilisable TXW-9X en alternative). Serrer la vis sans forcer.



Ne pas trop serrer !



5. Après un test de fonctionnement, la pince peut être réutilisée.



	• Ces vis à six pans creux ont un filetage gauche. Veuillez impérativement respecter le sens de rotation lors du desserrage et du serrage des vis à six pans creux. • Ne pas forcer lors du desserrage et du serrage de la vis à six pans creux, car cela n'est pas nécessaire. Un vissage forcé endommage le profil hexagonal intérieur. • Si des dommages sont constatés sur le profil hexagonal intérieur ou sur le profil du tournevis, veuillez remplacer immédiatement la vis à six pans creux et le tournevis ou les faire remplacer par le fabricant. • Le tournevis TXX-0X peut être lavé à l'eau froide avec un détergent doux. Il n'est pas adapté au nettoyage à l'eau chaude ni à la stérilisation à la vapeur à 134 °C.
---	--

Symboles

Dans la mesure où ils figurent sur le dispositif médical, son étiquette ou encore la notice, les symboles ont la signification suivante selon DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions d'utilisation électroniques	 Attention
REF Numéro catalogue	LOT Code de lot	SN Numéro de série
MD Dispositif médical	UDI Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Coordonnées du fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Allemagne Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-mail : info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---