


FEHLING CONCEPT X-stansen

1) Onderdelen / Verklarende basis

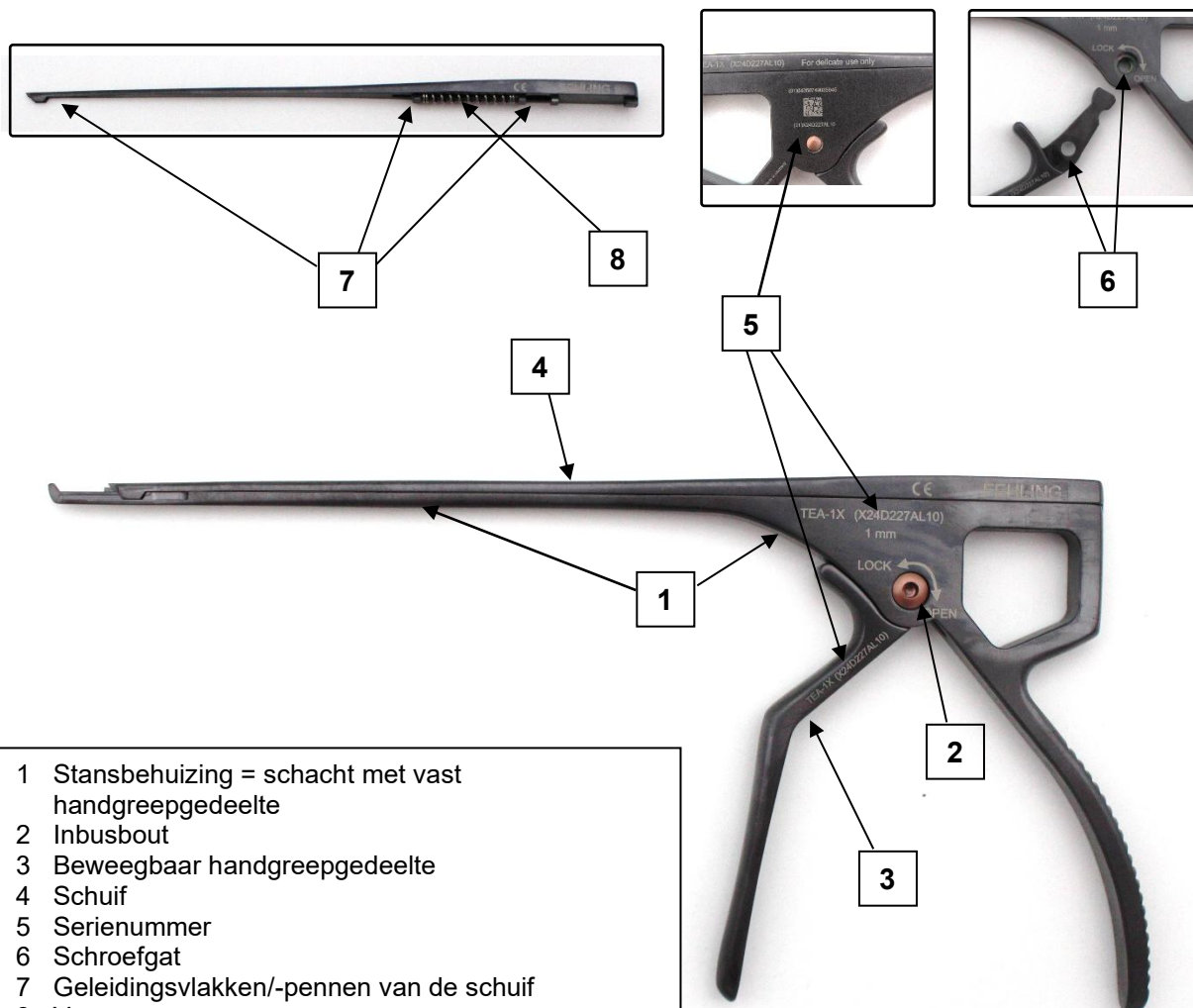

2) Demontage


1. Leg de stans voor demontage op een stevig werkoppervlak. Draai de inbusbout (2) met de schroevendraaier TXX-0X (alternatief: steriliseerbare schroevendraaier TXW-9X) met de klok mee en haal deze uit het schroefgat.




- Trek het beweegbare handgreepgedeelte (3) naar beneden en scheid het van de stansbehuizing (1). Om het ontgrendelen te vergemakkelijken, moet tegelijkertijd de schuif (4) in de richting van de stansvoet worden geschoven.



Bij het verwijderen van het beweegbare handgreepgedeelte (3) komt de schuif (4) automatisch los.

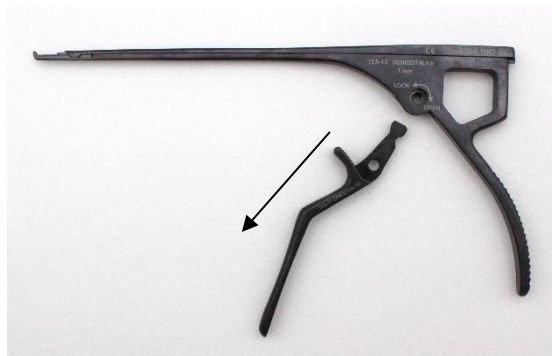

- De schuif (4) kan nu eenvoudig van de stansbehuizing (1) worden verwijderd.

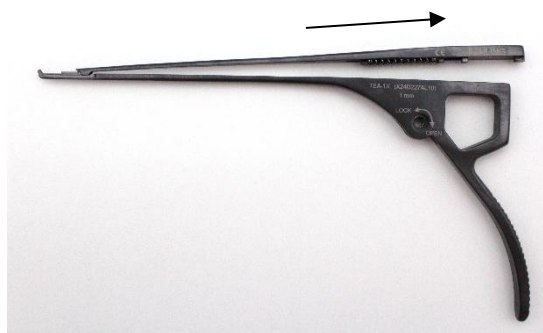

- Herverwerk de vier afzonderlijke onderdelen altijd samen in dezelfde houder.



Op de stansbehuizing (1), het beweegbare handgreepgedeelte (3) en de schuif (4) staat ter controle een identiek serienummer (5), bijvoorbeeld X24D227AL10. Alleen instrumentonderdelen met hetzelfde serienummer (5) mogen samen worden gemonteerd.

3) Montage


- Plaats de schuif (4) met de veer (8) op de schacht (1). Plaats hierbij de geleidingsvlakken/-pennen (7) van de schuif (4) in de overeenkomstige bevestigingen in de schacht (1).





De geleidingsvlakken/-pennen (7) van de schuif (4) moeten in de overeenkomstige bevestigingen in de schacht van de stansbehuizing (1) worden geplaatst.

2. Druk de schuif (4) langzaam in de richting van de stansvoet totdat het uiteinde van de schuif ongeveer 5 mm voorbij het uiteinde van de schacht in de richting van de stansvoet is geschoven.

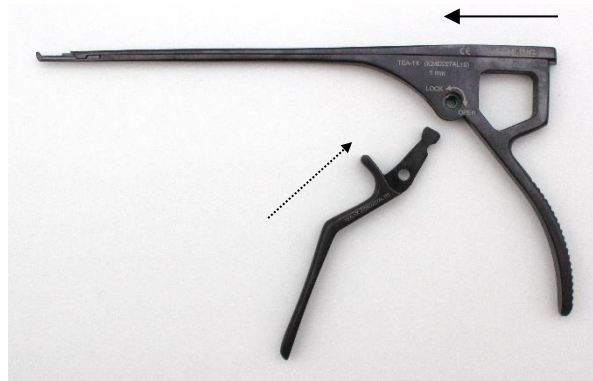

3. Schuif het beweegbare handgreepgedeelte (3) in de stansbehuizing (1) terwijl de positie van de schuif (4) en de schacht (1) ongewijzigd blijft. Zorg dat de schroefgaten (6) van het beweegbare handgreepgedeelte (3) en de stansbehuizing (1) precies op elkaar liggen.



4. Draai de inbusbout (2) met de schroevendraaier TXX-0X (alternatief: steriliseerbare schroevendraaier TXW-9X) tegen de klok in in het daarvoor bestemde schroefdraadgat. Draai de schroef stevig aan zonder kracht te zetten.



Niet te vast aandraaien!



5. Na een functionele test kan de stans opnieuw worden gebruikt.



	• Deze inbusbouten hebben een linkse schroefdraad. Draai de inbusbouten altijd los of vast in de juiste draairichting. • Oefen geen kracht uit bij het los- en vastdraaien van de inbusbout, omdat dit niet nodig is. Als u de schroef met te veel kracht aandraait, raakt het inbusprofiel beschadigd. • Als er schade aan het inbusprofiel of het schroevendraaierprofiel wordt vastgesteld, vervang dan onmiddellijk de inbusbout en de schroevendraaier of laat deze door de fabrikant vervangen. • De schroevendraaier TXX-0X kan met koud water en een mild reinigingsmiddel worden afgewassen. Deze is niet geschikt voor reiniging in heet water en stoomsterilisatie bij 134 °C.
---	--

Symbolen		
Voor zover afgebeeld op het medische hulpmiddel, het etiket van het medische hulpmiddel of in de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen overeenkomstig DIN EN ISO 15223-1 de volgende betekenis:		
 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekannetje voor te smeren punten	 CE-markering	

Contact met de fabrikant		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Duitsland Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	