


Kleszcze FEHLING CONCEPT X

1) Części składowe / podstawa wyjaśnienia

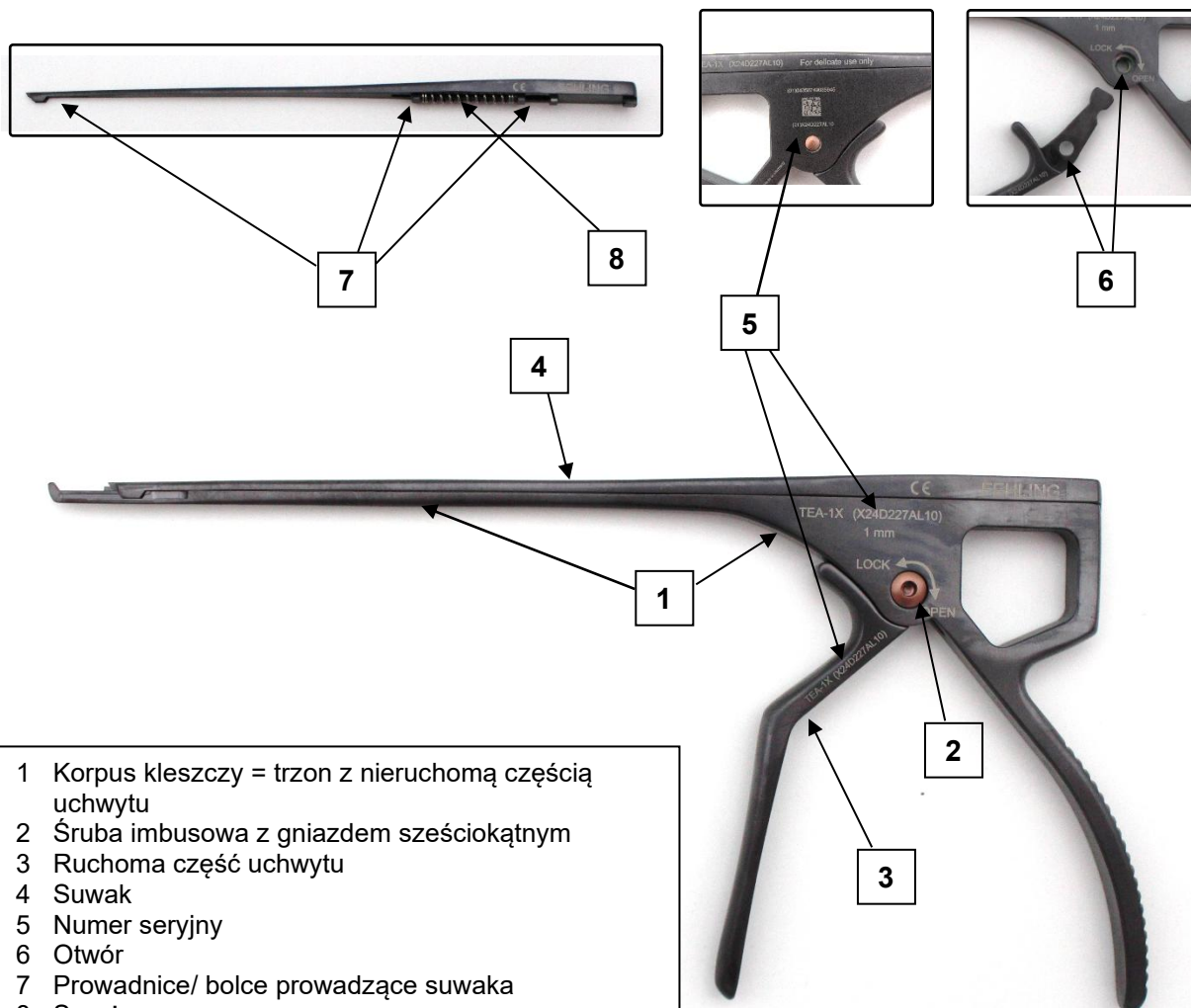

2) Demontaż


1. W celu wykonania demontażu kleszcze położyć na stabilnej powierzchni roboczej. Wykręcić śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym (2) za pomocą śrubokręta TXX-0X (alternatywnie sterylizowalnego śrubokręta TXW-9X) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć ją z otworu.




2. Pociągnąć ruchomą część uchwyty (3) w dół i oddzielić ją od korpusu kleszczy (1). W celu ułatwienia odblokowania, suwak (4) należy równocześnie przesunąć w kierunku stopy kleszczy.



Po zdjęciu ruchomej części uchwyty (3) suwak (4) automatycznie rozłączy się.

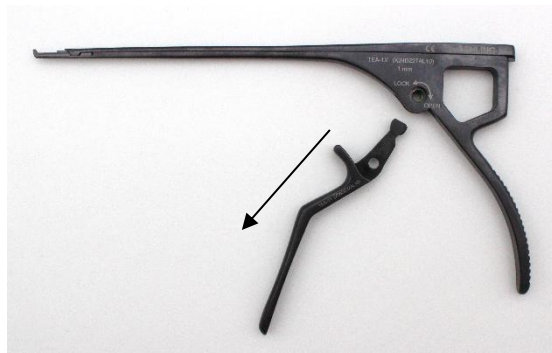

3. Teraz w prosty sposób zdjąć można suwak (4) z korpusu kleszczy (1).

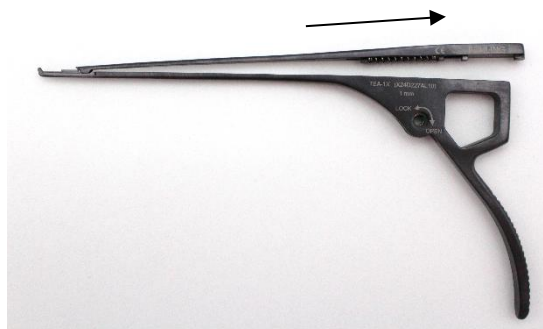

4. Cztery wymienione elementy zawsze poddawać regeneracji razem w tym samym pojemniku.



Korpus kleszczy (1), ruchoma część uchwyty (3) oraz suwak (4) są oznaczone identycznym numerem seryjnym do kontroli (5), przykładowo X24D227AL10. Składać można wyłącznie części instrumentu o tym samym numerze seryjnym (5).

3) Montaż


1. Założyć suwak (4) wraz ze sprężyną (8) na trzon (1). Przy czym prowadnice/ bolce prowadzące (7) suwaka (4) należy wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie (1).





Prowadnice/ bolce prowadzące (7) suwaka (4) muszą wsunąć się do odpowiednich gniazd w trzonie korpusu kleszczy (1).

2. Powoli naciskać suwak (4) w kierunku stopy kleszczy do momentu, aż koniec suwaka będzie przesunięty o około 5 mm poza koniec trzonu w kierunku stopy kleszczy.

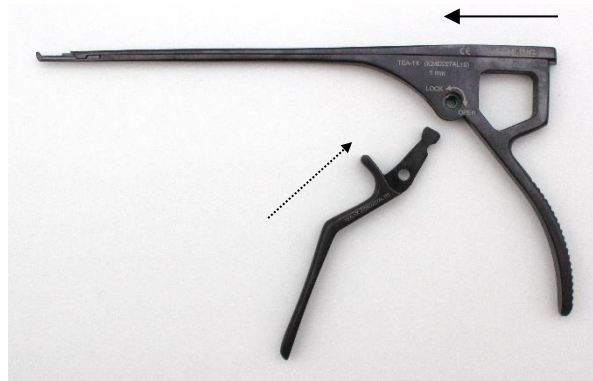

3. Nie zmieniając pozycji suwaka (4) i trzonu (1), przesunąć ruchomą część uchwyty (3) w kierunku korpusu kleszczy (1). Sprawdzić, czy otwory (6) w ruchomej części uchwyty (3) i korpusie kleszczy (1) są ze sobą dokładnie zrównane.



4. Wkręcić śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym (2) za pomocą śrubokręta TXX-0X (alternatywnie sterylizowalnego śrubokręta TXW-9X) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do przewidzianego do tego celu otworu gwintowanego. Dokręcić śrubę do końca, ale bez użycia siły.



Nie przekręcać nadmiernie!

5. Po wykonaniu testu działania kleszczy można używać ponownie.



	• Śruby imbusowe z gniazdem sześciokątnym mają gwint lewoskrętny. Podczas odkręcania i wkręcania śrub imbusowych z gniazdem sześciokątnym konieczne uwzględnić kierunek obrotu. • Podczas odkręcania i wkręcania śruby imbusowej z gniazdem sześciokątnym nie używać siły, gdyż nie jest to konieczne. Wkręcanie śruby przy użyciu nadmiernej siły spowoduje uszkodzenie gniazda sześciokątnego. • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia gniazda sześciokątnego lub końcówki wkrętaka, należy wymienić bezzwłocznie śrubę imbusową z gniazdem sześciokątnym i wkrętak lub zlecić wymianę producentowi. • Wkrętak TXX-0X myć można zimną wodą i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie jest on przeznaczony do czyszczenia w gorącej wodzie i sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C.
---	--

Symbole		
O ile symbole takie znajdują się na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub w instrukcji używania, to mają one następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	