


FEHLING CONCEPT X-stansar

1) Komponenter / förklaringsgrund

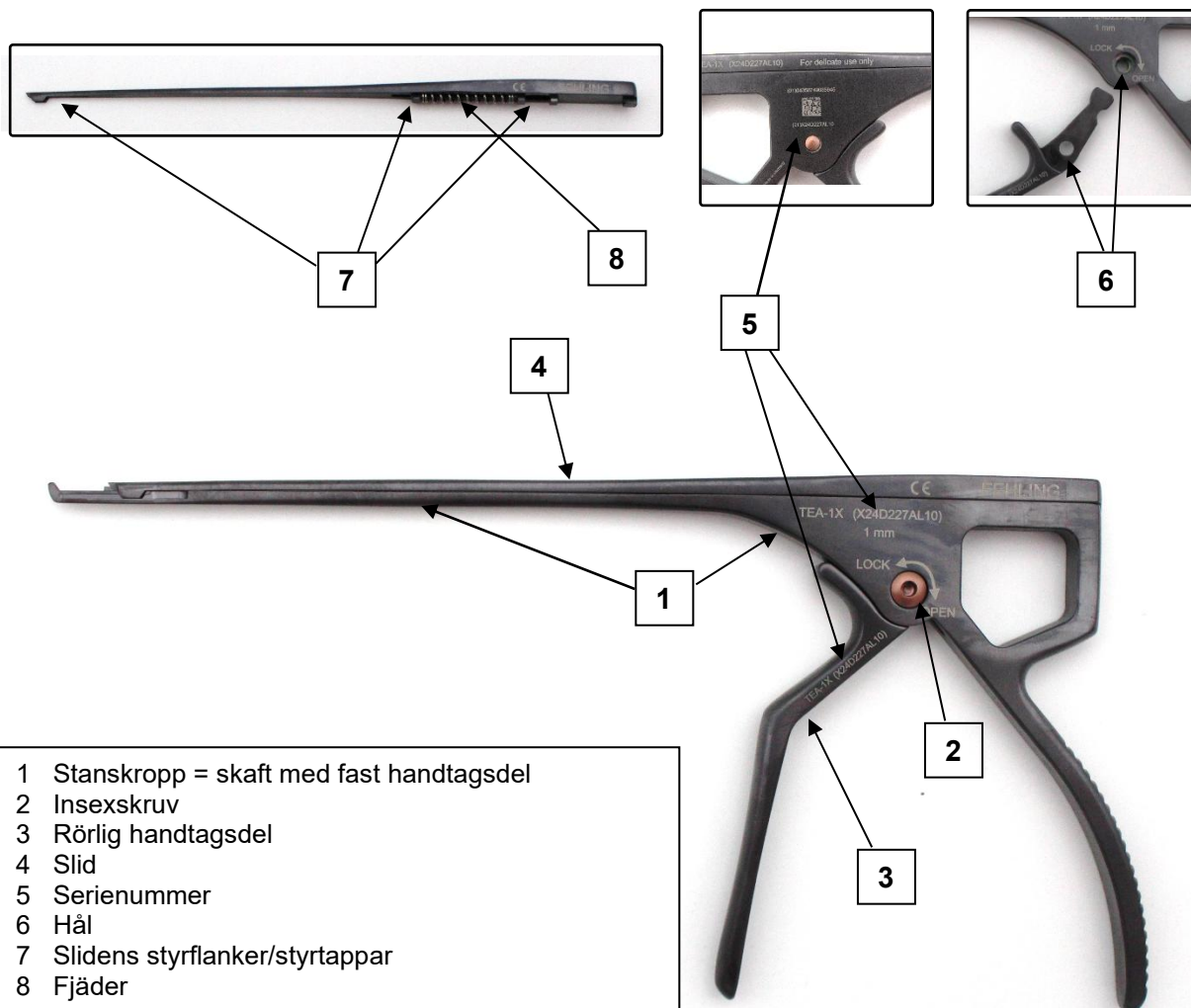

2) Demontering

1. Placera stansen på en fast arbetsyta för demontering. Vrid insexskruven (2) med skruvmejseln TXX-0X (alternativt steriliserbar skruvmejsel TXW-9X) medurs och ta ut den ur skruvhålet.




2. Dra den rörliga handtagsdelen (3) nedåt och separera den från stansroppen (1). För att underlätta upplåsningen bör sliden (4) samtidigt skjutas i riktning mot stansfoten.



När den rörliga handtagsdelen (3) tas bort lossnar sliden (4) automatiskt.

3. Sliden (4) kan nu enkelt tas bort från stansroppen (1).

4. Reprocessa alltid de fyra enskilda delarna tillsammans i samma behållare.

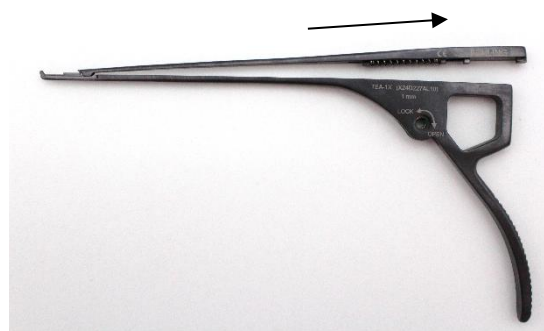

Stansroppen (1), den rörliga handtagsdelen (3) samt sliden (4) har ett identiskt serienummer för kontroll (5), till exempel X24D227AL10. Endast instrumentdelar med samma serienummer (5) får monteras ihop.

3) Montering


1. Placera sliden (4) med fjädern (8) på skaftet (1). För samtidigt in slidens (4) styrflanker/styrtappar (7) i motsvarande fästen i stansroppens skaft (1).





Slidens (4) styrflanker/styrtappar (7) måste passa in i motsvarande fästen i stans kroppens skaft (1).

- Tryck långsamt sliden (4) i riktning mot stansfoten, tills slidens ände har skjutits ca 5 mm över skaftets ände i riktning mot stansfoten.

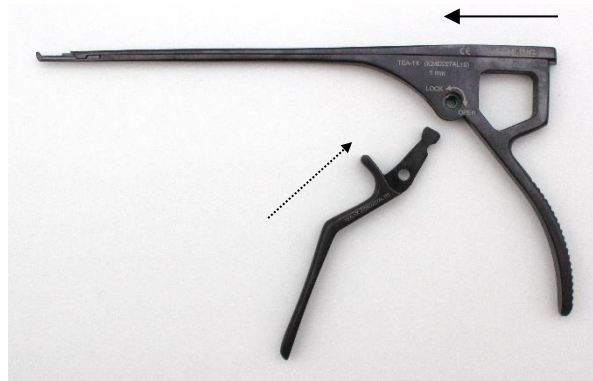

- Skjut in den rörliga handtagsdelen (3) i stans kroppen (1) utan att ändra slidens (4) och skaftets (1) position. Se till att borrhålen (6) på den rörliga handtagsdelen (3) och stans kroppen (1) ligger exakt över varandra.



- Skruva in insexskruven (2) moturs i det avsedda gängade borrhålet med skruvmejseln TXX-0X (alternativt steriliserbar skruvmejsel TXW-9X). Dra åt skruven ordentligt utan att använda överdriven kraft.



Dra inte åt för hårt!



- Efter ett funktionstest kan stansen användas igen.



	• Dessa insexskruvar har vänstergänga. Observera rotationsriktningen noga när du lossar och drar åt insexskruvarna. • Använd inte våld när insexskruven lossas och dras åt eftersom det inte krävs någon kraft för detta. Om skruven vrids med våld skadas insexprofilen. • Om skador kan konstateras på insexprofilen eller på skruvmejselprofilen, vänligen byt omedelbart ut insexskruven och skruvmejseln eller låt tillverkaren byta ut dem. • Skruvmejseln TXX-0X kan tvättas med kallt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Den är inte lämplig för rengöring i hett vatten och ångsterilisering vid 134 °C.
--	---

Symboler		
I den mån de visas på den medicintekniska produkten, etiketten för den medicintekniska produkten eller i bruksanvisningen har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Varning
 Katalognummer	 Satskod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik produktidentifiering	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Kontakta tillverkaren		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-post: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	