


CERAMO® APART STANZEN - Wichtige Hinweise für den Einsatz

☞ Während des Einsatzes darf niemals der goldene Verriegelungsknopf niedergedrückt werden. Die Stanze könnte sich dadurch ganz oder teilweise zerlegen.



Vor allem bei großem Kräfteinsatz darauf achten, dass der Daumen oder ein anderer Handteil nicht auf den Verriegelungsknopf drückt. Durch den Druck könnte der Entriegelungsmechanismus ausgelöst werden.

☞ Sollte die Stanze haken oder nicht stabil in der Führung laufen, umgehend prüfen, ob sie richtig montiert ist. Eine korrekt montierte Stanze ist daran zu erkennen, dass der goldene Verriegelungsknopf auf der beschrifteten Stanzenseite vollständig heraussteht.

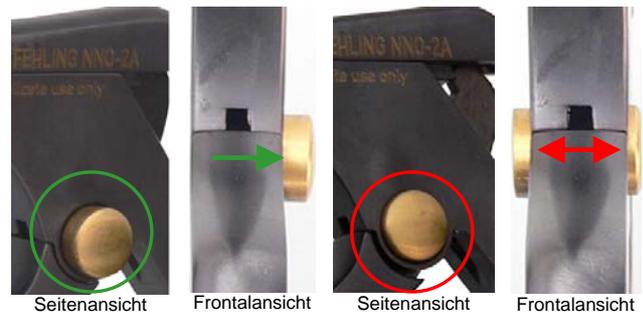

RICHTIG

FALSCH

Sollte das nicht der Fall sein, muss die Stanze vor dem weiteren Benutzen dem OP-Personal zur korrekten Montage übergeben werden (siehe gesonderte Montageanleitung).

CERAMO® APART STANZEN - Wichtige Hinweise für den Einsatz

☞ Während des Einsatzes darf niemals der goldene Verriegelungsknopf niedergedrückt werden. Die Stanze könnte sich dadurch ganz oder teilweise zerlegen.



Vor allem bei großem Kräfteinsatz darauf achten, dass der Daumen oder ein anderer Handteil nicht auf den Verriegelungsknopf drückt. Durch den Druck könnte der Entriegelungsmechanismus ausgelöst werden.

☞ Sollte die Stanze haken oder nicht stabil in der Führung laufen, umgehend prüfen, ob sie richtig montiert ist. Eine korrekt montierte Stanze ist daran zu erkennen, dass der goldene Verriegelungsknopf auf der beschrifteten Stanzenseite vollständig heraussteht.



RICHTIG

FALSCH

Sollte das nicht der Fall sein, muss die Stanze vor dem weiteren Benutzen dem OP-Personal zur korrekten Montage übergeben werden (siehe gesonderte Montageanleitung).